




STAIR CHAIR

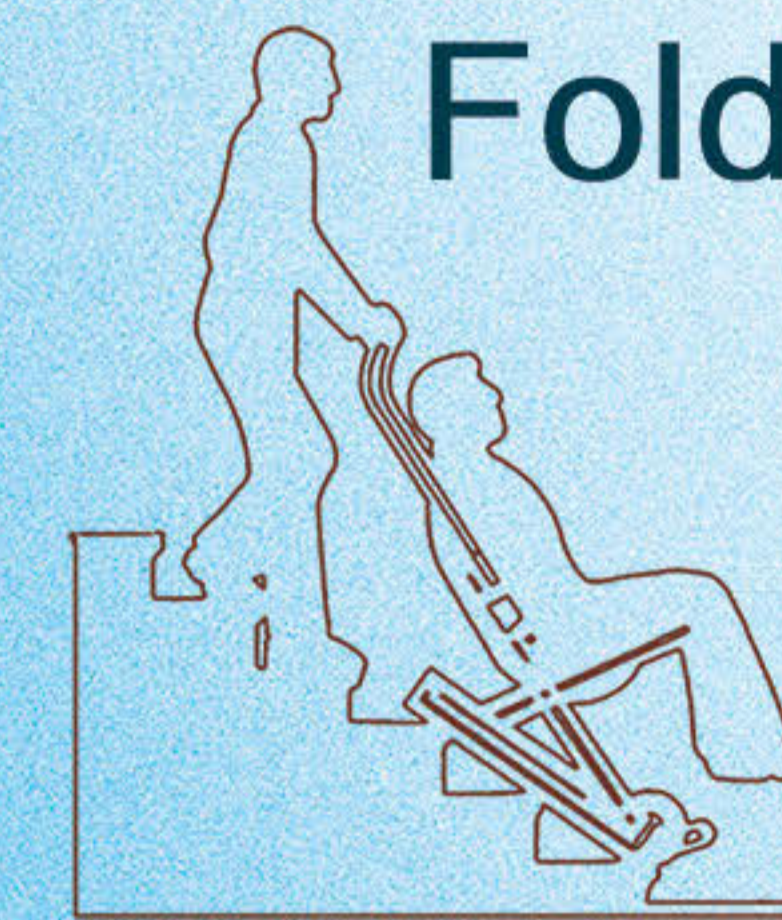

Folding Electric Climbing Chair Stair
Stretcher For Evacuation With Wheels

vest belt, lithium battery, wrench set, spongy cushion
There are different frame color and seat
color to suit different environment use



江苏如翼医疗科技有限公司

JIANGSU ROOE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

Add: Room1311,1313, Guotai New World Plaza, No19,

East Renmin Road,Zhangjiagang, Jiangsu, China.

Tel:+86 512 58810663

Whatsapp/Mobile:+ 86-18962287398;15962399164

Email:info@wanrooemed.com

Http://wanrooemed.com



江苏如翼医疗科技有限公司

JIANGSU ROOE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

EA-6FPN

Electric Stair Climbing Wheelchair 电动爬楼椅

ABS seat
ABS 舒适坐垫



Detachable lithium battery,
easy to charge, with lock
可拆卸锂电池, 方便充电, 且带防盗锁



Samsung lithium battery, detachable
三星品牌锂电池 (含CE认证), 可拆卸



Charger
(CE certificate)
充电器 (含CE认证)



S/S button, sink the
button then chair move
不锈钢金属按钮, 按键下沉启动,
LED灯, 三挡调速



Backrest height adjustable,
total 4 positions
靠背可分四档调节



Rear handle autolock
后手把带自动锁



Open the lock,
pull out the track
往外拨开按钮解锁,
向后拉开履带



High wear-resisting rubber wheels
高耐磨橡胶轮



Rack fold & unfold is controlled by gas spring,
hold the rear handle, one leg step, fold the track
仅需扶住椅子, 用脚轻踩, 履带便可收起

Specification:

- 1.24V, 200W or 36V, 300W speed-adjustable with brushless motor, three speeds adjustable, with cover, power system with soft start protection, make battery using time longer, motor and battery service life also longer.
- 2.36V: With LED light, LCD power display.
- 3.Easy operating, it can climb up and down stairs smoothly and steadily by track.
- 4.It won't glide or fall down when stop on the stairs, very safe and reliable.
- 5.Circuit is inside the pipe, waterproof, long life time, motor is noiseless during operating.
- 6.The installation position of the battery is in accordance with international standards, not close to the body, make it more safe for users. Detachable battery.
- 7.With 4 wear-resistant rubber wheels, the chair can be used as a wheelchair on the ground.
- 8.The chair is equipped with vest belt, metal buckle straps, to ensure the safety during transport.
- 9.Made of aluminum alloy, foldable, compact and lightweight.
- 10.The electric stair chair is widely used in home for the old people, school security, hospitals, hotels etc for emergency evacuation.

Accessories: Vest belt; Lithium battery; Wrench set; Spongy cushion.

Optional: Dust cover; Wall bracket; Manual switching clutch(the chair can glide down stairs if battery failed).

产品说明:

- 1.24V,200W 或36V,300W 无刷电机, 超强动力, 三档调速, 电路系统带软起保护, 电机和电池的使用寿命更长。
- 2.带夜间照明LED灯, 电量显示液晶屏。
- 3.该款电动爬楼梯椅广泛适用于家庭老人, 学校, 酒店, 医院等上下楼梯或紧急疏散使用。
- 4.本产品对楼梯台阶的高度和台阶平面的宽度没有限制, 只要是一般小区的楼梯都能使用。
- 5.操作简单, 履带式设计, 上下楼非常平稳轻松, 在上下楼过程中即使停下也不会下滑或倾斜, 非常安全可靠。
- 6.隐蔽式防水电路设计, 操作无噪音, 使用寿命更长, 且更加高端大方。
- 7.电池的安装位置按照国际标准, 不紧贴人体, 让使用者感觉更舒心。
- 8.50CM加宽椅背设计, 适用于胖瘦人群, 尤其使老人坐起来更为舒适。
- 9.带有4个轮子, 在平地上可当椅子推行, 轮子为橡胶材质, 坚固耐磨。
- 10.椅子配有背心式金属扣绑带, 以保证在转运过程中的安全。
- 11.铝合金材质, 可折叠, 小巧轻便。

配件: 背心式安全带; 锂电池; 紧固螺丝扳手套装; 爱心坐垫。

选配件: 墙上挂钩; 防尘罩; 手动切换离合器(电池没电时可手动推下)。

- 1.200W or 300W brushless motor, super power, three speeds adjustable.
- 2.50cm width backrest, suitable for all people.
- 3.ABS seat, more comfortable for old people.
- 4.Vest belts, more safe.

- 1.200W或300W无刷电机, 超强动力, 三档调速。
- 2.50cm 宽靠背, 适用于所有人群。
- 3.ABS软垫, 更适用于老年人。
- 4.背心交叉式绑带, 安全可靠。



With LED light. It won't glide or fall down when stop on the stairs, very safe and reliable.
带LED照明灯, 即使中途停留在楼梯上, 不会下滑或倾斜

PRODUCT SPECIFICATION

MODEL: EA-6FPN

N.W: 30kg (24V,200W); 27kg (36V,300W,speed-adjustable)		LOAD-BEARING: 160KG
PACKING: 1PC/CTN	WOOD BOX SIZE: 116x55x30cm	G.W: 45KG
FOLDED SIZE(L*W*H): 115x50x27cm	Using Time of Full Charge: 2hours <small>(up and down five layer building stairs 15 times)</small>	
Suitable Stair: No less than 80x80cm	Speed: About 45-55 steps per min	
Repeated Charging Times: 500times	Battery Life: 3-5YEARS	
UN-FOLD SIZE (L*W*H): 80~110x50x110~160cm		
Brushless Motor: 24V, 200W; 36V,300W (speed-adjustable), High Quality, noiseless		
Track: High wear-resistant materials, life time 3-5 years		

产品描述

型号: EA-6FPN


自重: 30kg (24V,200W); 27kg (36V,300W,速度可调)		承重: 160KG
充电使用时间: 2小时 <small>(相当于5层楼梯上下15多次)</small>	可重复充电次数: 500多次	使用寿命: 3-5年
展开尺寸: 80~110x50x110~160cm	折叠尺寸: 115x50x27cm	
履带: 高耐磨材料, 使用寿命3-5年	速率: 大约每分钟45-55个台阶	
无刷电机电压: 24V, 200W; 36V,300W (速度可调), 高质量.几乎无噪音		
对楼道的要求: 不低于80x80cm的均使用		




82cm long track, can easy reach 3 stairs together, very smooth
82厘米长履带, 可搭乘3个最长的台阶, 上下楼不会颠簸




COLOR

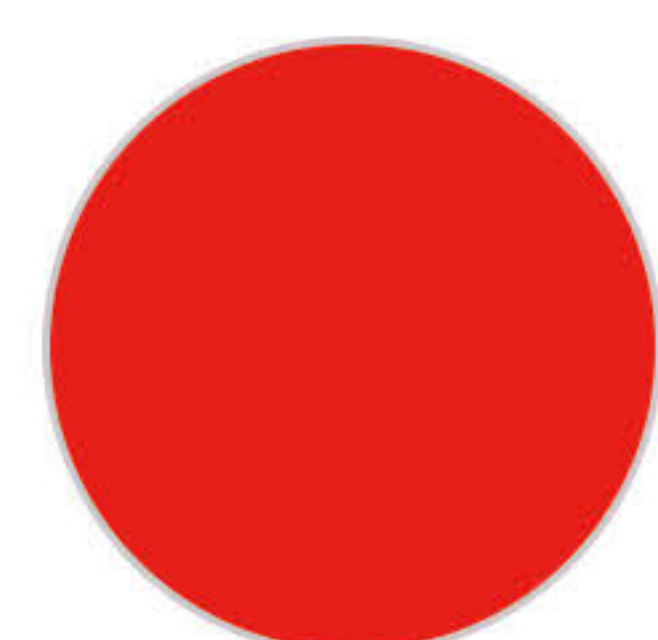

Red

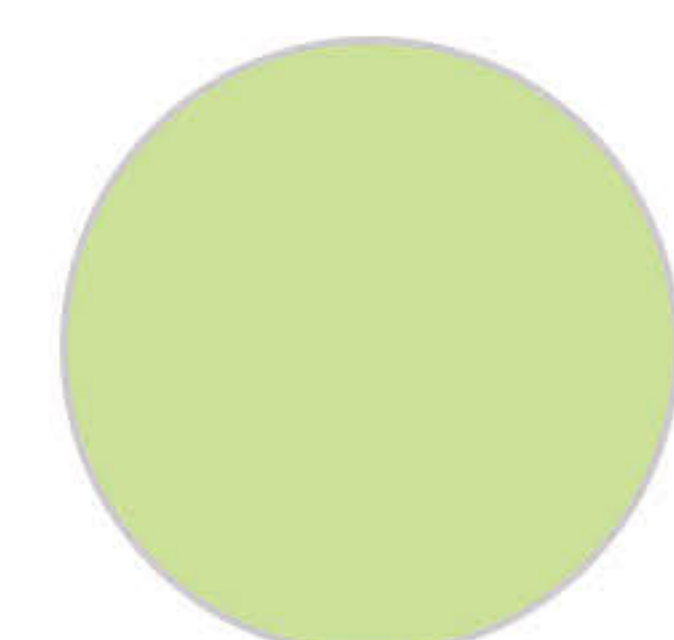

Green

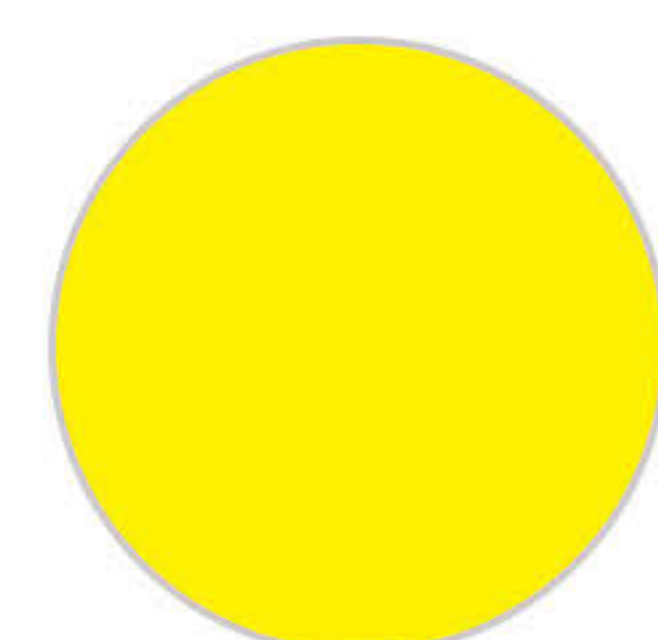

Yellow



white

Different frame color, can be customized
(不同的框架颜色, 量大可以定制)

MATERIAL



ABS board



PVC leather with foam



PVC leather

Seat material, can be customized
(座椅材料, 可定制)


CONTROL PANEL




24V



36V
(speed-adjustable)

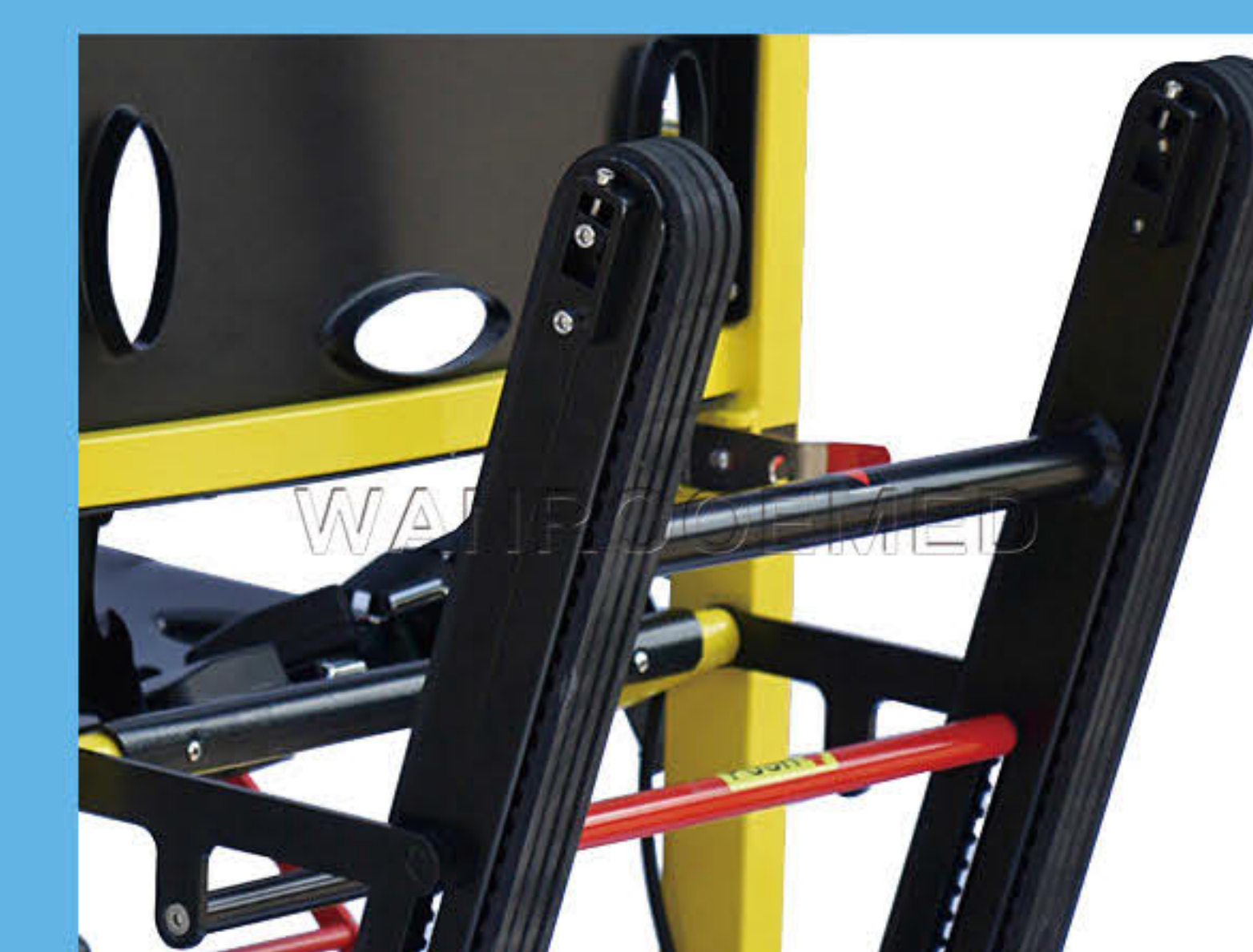

Track with vertical slot
(more comfortable)

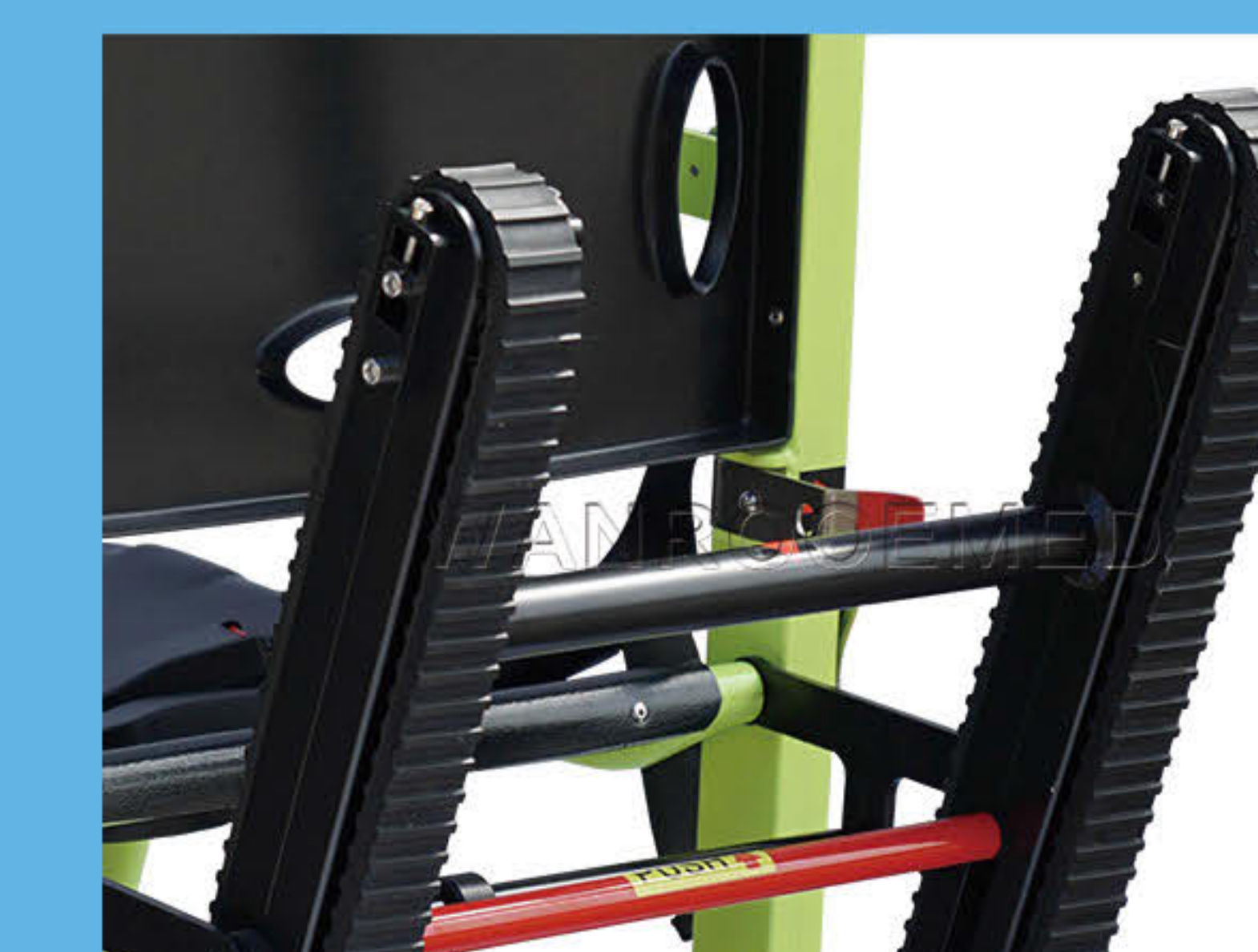

Track with ridges
(anti-sliding)

OPTIONAL



Dust cover



Pillow



Wall bracket


ACCESSORIES



Vest belt



Lithium battery(24V/36V)

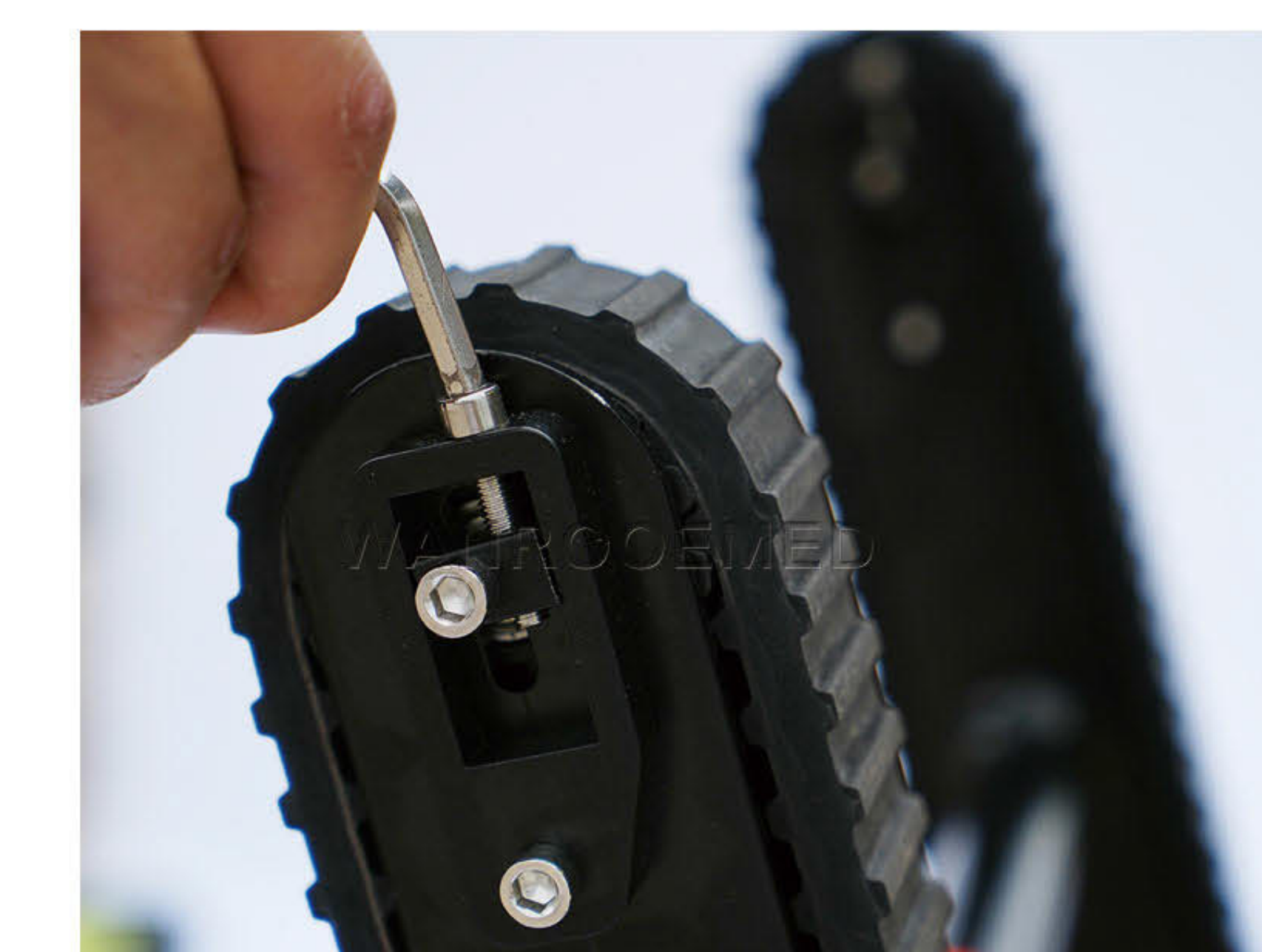

Wrench set

EA-7FPN

Electric Stair Climbing Trolley

电动爬楼车

S/S button, sink the button then chair move
不锈钢金属按钮，按键下沉启动，LED灯，三挡调速



Samsung lithium battery, detachable
三星品牌锂电池（含CE认证），可拆卸



Charger (CE certificate)
充电器（含CE认证）



Detachable lithium battery, easy to charge, with lock
可拆卸锂电池，方便充电，且带防盗锁




Backrest height adjustable, total 4 positions
靠背可分四档调节



Track adjust
履带调节




Rear handle autolock
后手把带自动锁

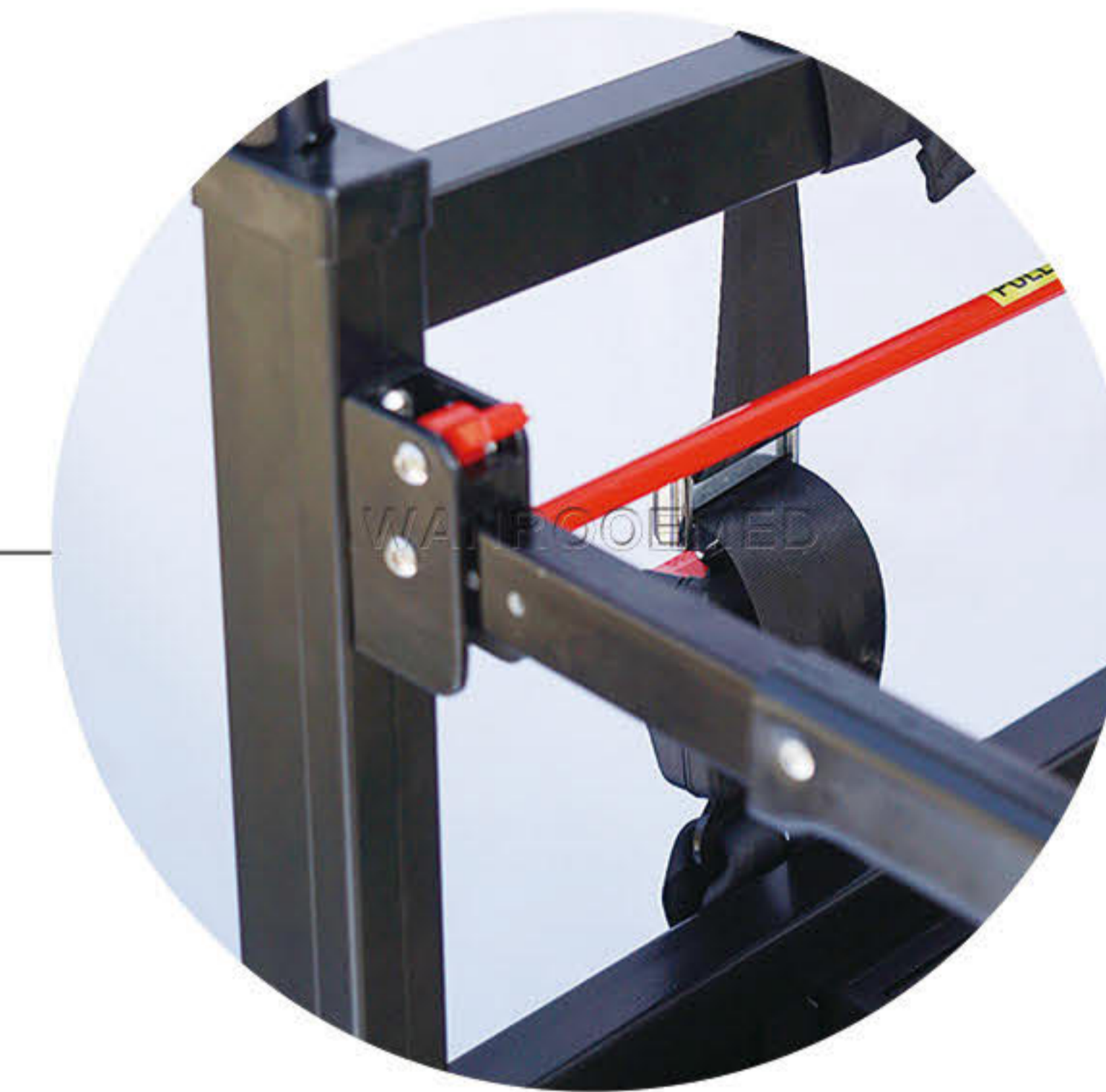

Open the lock, pull out the track
往外拨开按钮解锁，向后拉开履带



Rack fold & unfold is controlled by gas spring, hold the rear handle, one leg step, fold the track
仅需扶住椅子，用脚轻踩，履带便可收起

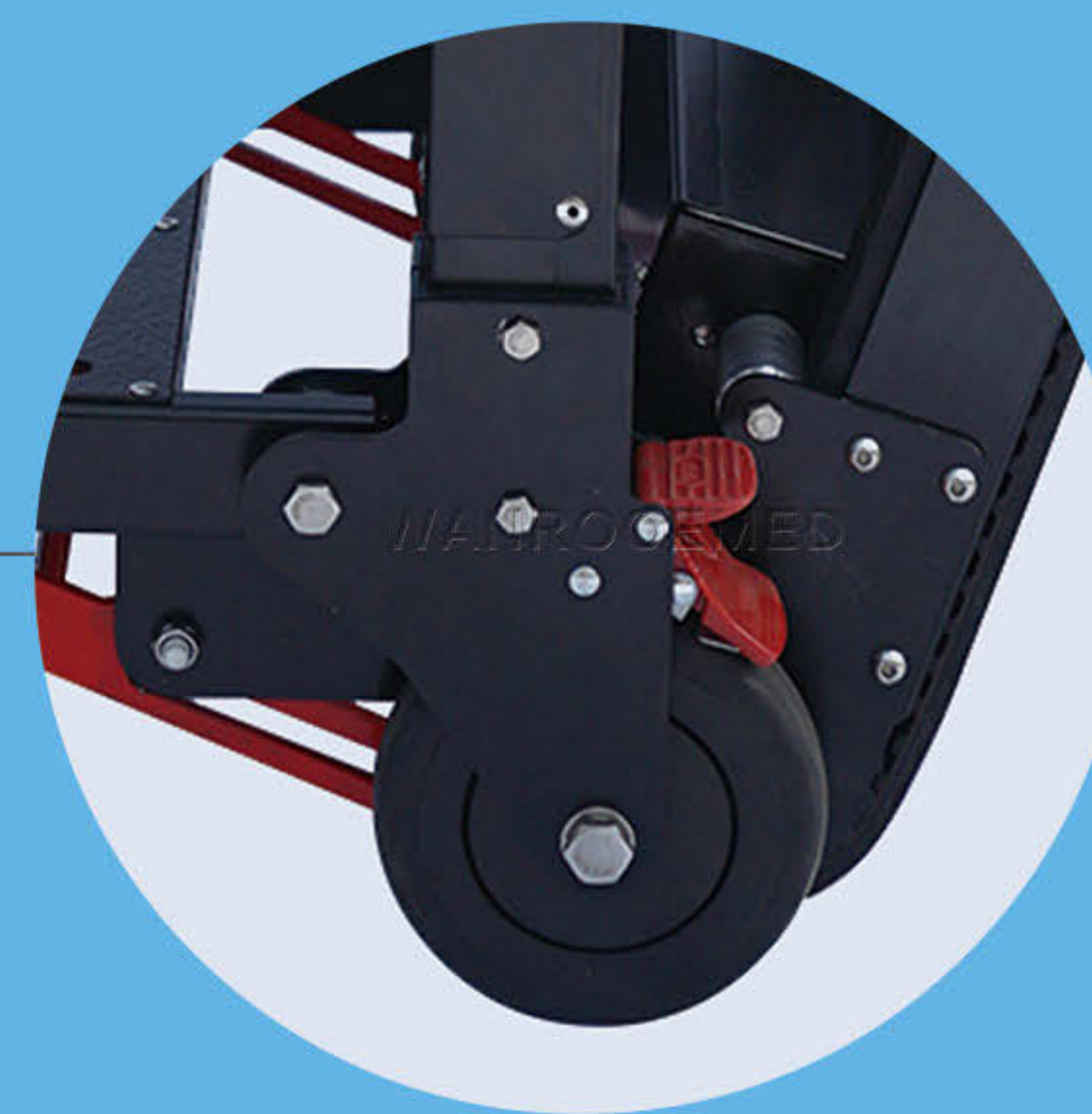

High wear-resisting rubber wheels
高耐磨橡胶轮

Specification:

- 1.36V, 300W brushless motor, three speeds adjustable, with cover, power system with soft start protection, make battery using time longer, motor and battery service life also longer.
- 2.With LED light, LCD power display.
- 3.Easy operating, it can climb up and down stairs smoothly and steadily by track.
- 4.It won't glide or fall down when stop on the stairs, very safe and reliable.
- 5.Circuit is inside the pipe, waterproof, long life time, motor is noiseless during operating.
- 6.With 4 wear-resistant rubber wheels.
- 7.The trolley is equipped with metal buckle straps, to ensure the safety during transport.
- 8.Made of aluminum alloy, foldable, compact and lightweight.
- 9.The electric stair climbing trolley is widely used in all kinds of stairs to transport goods.

Accessories: Lithium battery; Wrench set.

Optional: Dust cover; Wall bracket; Manual switching clutch(the trolley can glide down stairs if battery failed).

产品说明:

- 1.36V, 300W 无刷电机, 超强动力, 三档调速, 电路系统带软起保护, 电机和电池的使用寿命更长。
- 2.带夜间照明LED灯, 电量显示液晶屏。
- 3.该款电动爬楼车广泛适用于各种楼道上下楼搬运货物使用。
- 4.本产品对楼梯台阶的高度和台阶平面的宽度没有限制, 只要是一般小区的楼梯都能使用。
- 5.操作简单, 履带式设计, 上下楼非常平稳轻松, 在上下楼过程中即使停下也不会下滑或倾斜, 非常安全可靠。
- 6.隐蔽式防水电路设计, 操作无噪音, 使用寿命更长, 且更加高端大方。
- 7.带有4个轮子, 轮子为橡胶材质, 坚固耐磨。
- 8.配有金属扣绑带。
- 9.铝合金材质, 可折叠, 小巧轻便。

配件: 锂电池, 紧固螺丝扳手套装。

选配件: 墙上挂钩, 防尘罩; 手动切换离合器(电池没电时可手动推下)。

- 1.300W brushless motor.
- 2.super power.
- 3.three speeds adjustable.

- 1.300W无刷电机。
- 2.超强动力。
- 3.三档调速。



PRODUCT SPECIFICATION

MODEL: EA-7FPN

N.W:27kg(36V,300W,speed-adjustable)		LOAD-BEARING: 160KG
PACKING: 1PC/CTN	WOOD BOX SIZE: 116x55x30cm	G.W: 45KG
FOLDED SIZE(L*W*H): 115x50x27cm		Using Time of Full Charge: 2hours <small>(up and down five layer building stairs 15 times)</small>
Suitable Stair: No less than 80x80cm		Speed: About 45-55 steps per min
Repeated Charging Times: 500times		Battery Life: 3-5YEARS
UN-FOLD SIZE (L*W*H): 80~110x50x110~160cm		
Brushless Motor: 36V,300W,Speed-adjustable, High Quality, Noiseless		
Track: High wear-resistant materials, Life time 3-5 years		

产品描述

型号: EA-7FPN

自重: 27kg (36V,300W,速度可调)		承重: 160KG
充电使用时间: 2小时 <small>(相当于5层楼梯上下15多次)</small>	可重复充电次数: 500多次	使用寿命: 3-5年
展开尺寸: 80~110x50x110~160cm		折叠尺寸: 115x50x27cm
履带: 高耐磨材料, 使用寿命3-5年		速率: 大约每分钟45-55个台阶
无刷电机电压: 36V,300W,速度可调, 高质量.几乎无噪音		
对楼道的要求: 不低于80x80cm的均使用		



speed-adjustable the stairs, very safe and reliable.
即使中途停留在楼梯上, 不会下滑或倾斜



82cm long track, can easy reach 3 stairs together, very smooth
82厘米长履带,可搭乘3个最长的台阶,上下楼不会颠簸

EA-8FPN

Electric Stair Climbing Wheelchair 电动爬楼椅

ABS seat
ABS 舒适坐垫

Universal remote control
智能万向遥控器

Detachable lithium battery,
easy to charge, with lock
可拆卸锂电池, 方便充电, 且带防盗锁

Samsung lithium
battery, detachable
三星品牌锂电池
(含CE认证), 可拆卸

Charger
(CE certificate)
充电器 (含CE认证)

S/S button, sink the
button then chair move
不锈钢金属按钮, 按键下沉启动,
LED灯, 三挡调速

Backrest height adjustable,
total 4 positions
靠背可分四档调节

Rear handle autolock
后手把带自动锁

Open the lock,
pull out the track
往外拨开按钮解锁,
向后拉开履带

Rack fold & unfold is controlled by gas spring,
hold the rear handle, one leg step, fold the track
仅需扶住椅子, 用脚轻踩, 履带便可收起

High wear-resisting rubber wheels
高耐磨橡胶轮

Specification :

- 1.36V, 300W brushless motor, three speeds adjustable, with cover, power system with soft start protection, make battery using time longer, motor and battery service life also longer.
- 2.With LED light, LCD power display.
- 3.Easy operating, it can climb up and down stairs smoothly and steadily by track.
- 4.It won't glide or fall down when stop on the stairs, very safe and reliable.
- 5.Circuit is inside the pipe, waterproof, long life time, motor is noiseless during operating.
- 6.The installation position of the battery is in accordance with international standards, not close to the body, make it more safe for users. Detachable battery.
- 7.The chair is equipped with vest belt, metal buckle straps, to ensure the safety during transport.
- 8.Made of aluminum alloy, foldable, compact and lightweight.
- 9.The electric stair chair is widely used in home for the old people, school security, hospitals, hotels etc for emergency evacuation.
- 10.Universal remote control, speed adjustable,with honking Wheelchair has 2pcs 150W brushless motor with brakes, speed adjustable, shock absorption front wheels, does not slide when the slope.
- 11.when no power, switch to manual gear, can also use as a manual wheelchair.

Accessories : Vest belt ; lithium battery ; wrench set ; spongy cushion.

Optional : Dust cover ; Wall bracket ; Manual switching clutch(the wheelchair can glide down stairs if battery failed).

产品说明:

- 1.36V, 300W 无刷电机, 超强动力, 上下楼三档调速, 电路系统带软起保护, 电机和电池的使用寿命更长。
- 2.带夜间照明LED灯, 电量显示液晶屏。
- 3.该款电动爬楼梯广泛适用于家庭老人, 学校, 酒店, 医院等上下楼梯或紧急疏散使用。
- 4.本产品对楼梯台阶的高度和台阶平面的宽度没有限制, 只要是一般小区的楼梯都能使用。
- 5.操作简单, 履带式设计, 上下楼非常平稳轻松, 在上下楼过程中即使停下也不会下滑或倾斜, 非常安全可靠。
- 6.隐蔽式防水电路设计, 操作无噪音, 使用寿命更长, 且更加高端大方。
- 7.电池的安装位置按照国际标准, 不紧贴人体, 让使用者感觉更舒心。
- 8.50CM加宽椅背设计, 适用于胖瘦人群, 尤其使老人坐起来更为舒适。
- 9.椅子配有背心式金属扣绑带, 以保证在转运过程中的安全。
- 10.铝合金材质, 可折叠, 小巧轻便。
- 11.通过智能万象控制器椅子地面行驶操作自如, 速度加减档按钮可调节行驶速度, 转向摇杆360度无死角操作, 自带喇叭鸣笛警示功能。
- 12.代步采用2个150W无刷电机, 变速流畅, 进退自如, 前轮带减震设计, 行驶平稳, 采用电磁刹车系统, 斜坡松手即停, 不滑坡。
- 13.没电时切换到手动档位, 可当手动轮椅推行。

配件: 背心式安全带; 锂电池; 紧固螺丝扳手套装; 爱心坐垫。

选配件: 墙上挂钩; 防尘罩; 手动切换离合器(电池没电时可手动推下)。

300W brushless motor, super power, three speeds adjustable.
50cm width backrest, suitable for all people.
ABS seat, more comfortable for old people.
Vest belts, more safe.

300W 无刷电机, 超强动力, 三档调速 50cm 宽靠背, 适用于所有人群。
ABS 舒适坐垫, 更适用于老年人。
背心交叉式绑带, 安全可靠。

PRODUCT SPECIFICATION

MODEL: EA-8FPN

N.W:32kg(36V,300W,speed-adjustable)		LOAD-BEARING: 160KG
PACKING: 1PC/CTN	WOOD BOX SIZE: 118*55*30CM	G.W: 45KG
FOLDED SIZE(L*W*H): 115x50x27cm	Using Time of Full Charge: 2hours <small>(up and down five layer building stairs 15 times)</small>	
Suitable Stair: No less than 80*80CM	Speed: About 45-55 steps per min	
Repeated Charging Times: 500times	Battery Life: 3-5YEARS	
UN-FOLD SIZE (L*W*H): 80~110x50x110~160cm		
Brushless Motor: 36V,300W,Speed-adjustable, High Quality, Noiseless		
Track: High wear-resistant materials, Life time 3-5 years		


产品描述

型号: EA-8FPN

自重: 32kg (36V,300W,速度可调)		承重: 160KG
充电使用时间: 2小时 <small>(相当于5层楼梯上下15多次)</small>	可重复充电次数: 500多次	使用寿命: 3-5年
展开尺寸: 80~110x50x110~160cm	折叠尺寸: 115x50x27cm	
履带: 高耐磨材料, 使用寿命3-5年	速率: 大约每分钟45-55个台阶	
无刷电机电压: 36V,300W,速度可调, 高质量.几乎无噪音		
对楼道的要求: 不低于80x80cm的均使用		



speed-adjustable the stairs, very safe and reliable.
即使中途停留在楼梯上, 不会下滑或倾斜

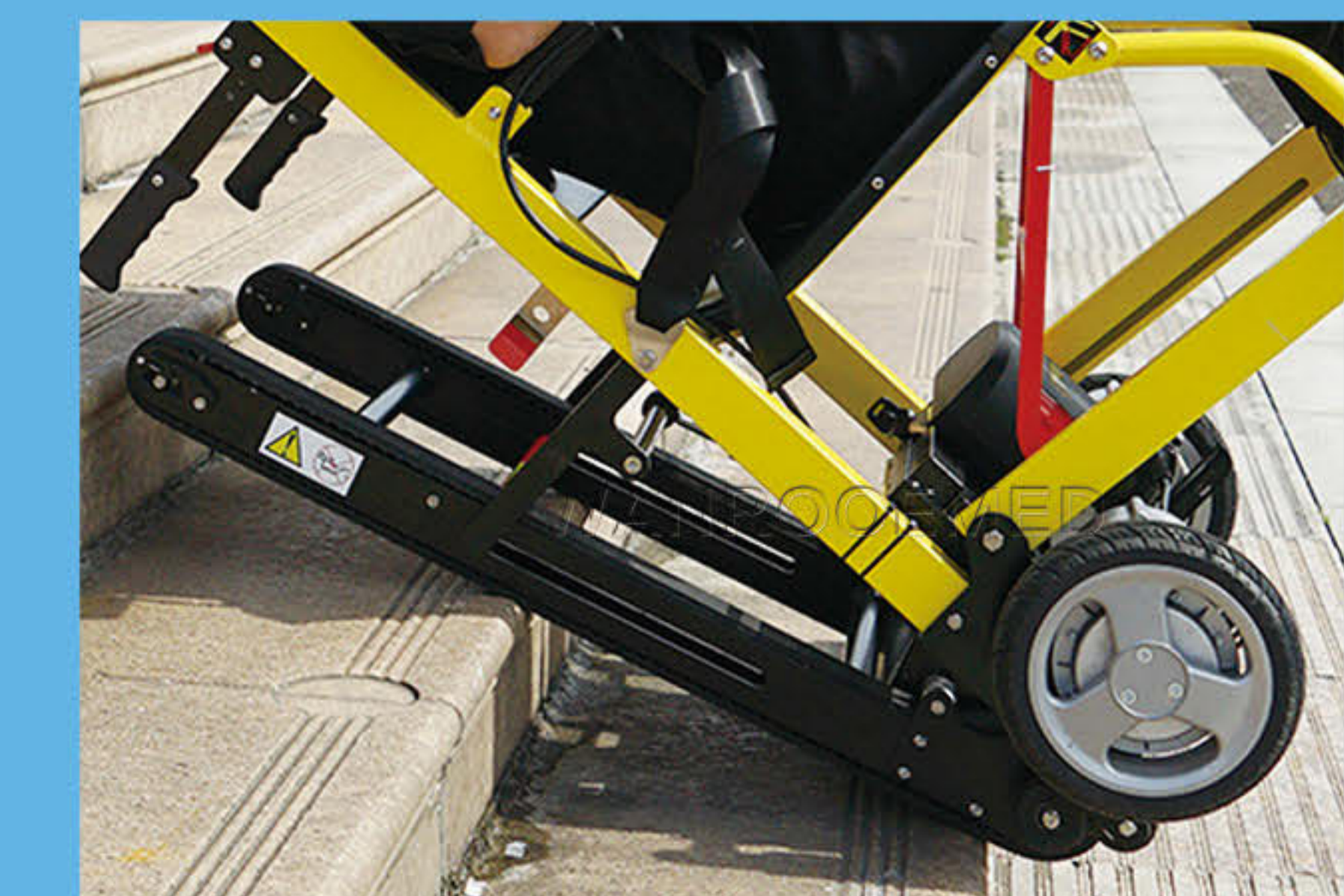

82cm long track, can easy reach 3 stairs together, very smooth
82厘米长履带,可搭乘3个最长的台阶,上下楼不会颠簸

EA-6G

Evacuation Chair

楼梯椅

PVC leather seat
PVC舒适座垫



Safety belt
安全带




Front handle (Optional)
前把手(选配)



Front wheel,
high wear-resisting
rubber wheels
前轮, 高耐磨橡胶轮



Rear handle (Optional)
后背拉手(选配)

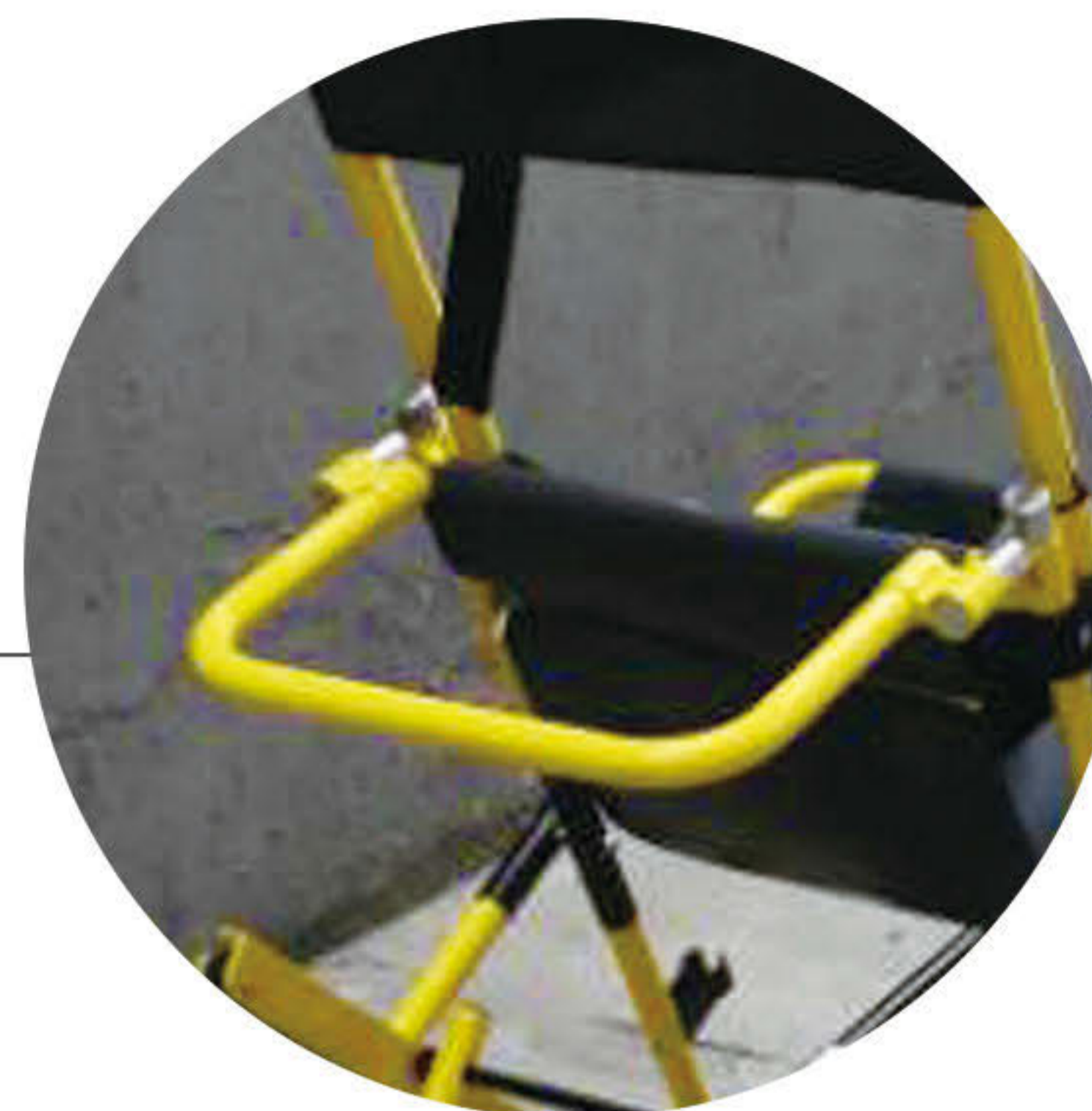

Zipper of high quality, it is convenient to
detach and clean the pvc seat
高品质拉链, 方便拆卸和清洁PVC坐垫。



Rubber track
高质量履带



Track's folding&unfolding is
controlled by gas spring
履带的折叠和展开是由气压弹簧控制的

Rear wheel, steady for chair
后轮, 稳定椅身



OPTIONAL



Dust cover



Rear handle



Front handle



Wall bracket

Specification:

1. Standard model Evacuation Chair EA-6G, The evacuation stair chair designed to allow a safe controlled descent of an individual from unlimited stories.
2. With track, only one person can push down the stretcher.
3. It is made of high-strength powder-coated aluminum alloy, PVC seat.
4. Telescoping backrest.
5. Foldable, easy for storage.
6. 400 lbs pound weight capacity.
7. Safe, easy to open and super light weight only 19 lbs.
8. YOUR LOGO AVAILABLE.

Optional : Footrest ; Mounting Wall Bracket ; Dust Cover.

General Color: Cloth in black, and frame in yellow;
Different frame color, can be customized.

产品说明:

1. EA-6G 这个型号的疏散担架，其设计能够让人在可控制的安全范围内下楼梯。
2. 带有履带，只需一人就可将担架推下楼梯。
3. 椅子由高强度的铝合金制成，座垫PVC材质。
4. 靠背可伸缩。
5. 可折叠，便于储存。
6. 可承受400磅的重量。
7. 安全，易于打开，重量超轻仅为19磅。
8. 产品上可以添加您的LOGO。

可选配件: 踏板；安装墙壁支架；防尘罩。

一般颜色: 黑色布料，黄色框架；不同的框架颜色，可以定制。

PRODUCT SPECIFICATION

MODEL: EA-6G

OPEN SIZE: 72x52x137cm		FOLDED: 52x16x100cm
Selft weight: 11kg	loading: 160kg	Package: 52x109x19cm
Front wheel dia: 15cm	G.W.: 13kg	Back wheel dia: 5cm


产品描述

型号: EA-6G

展开尺寸: 72x52x137cm		折叠尺寸: 52x16x100cm
自重: 11kg	承重: 160kg	包装尺寸: 52x109x19cm
前轮直径: 15cm	毛重: 13kg	后轮直径: 5cm



With track, only one person can push down the stretcher.
带有履带，只需一人就可将担架推下楼梯

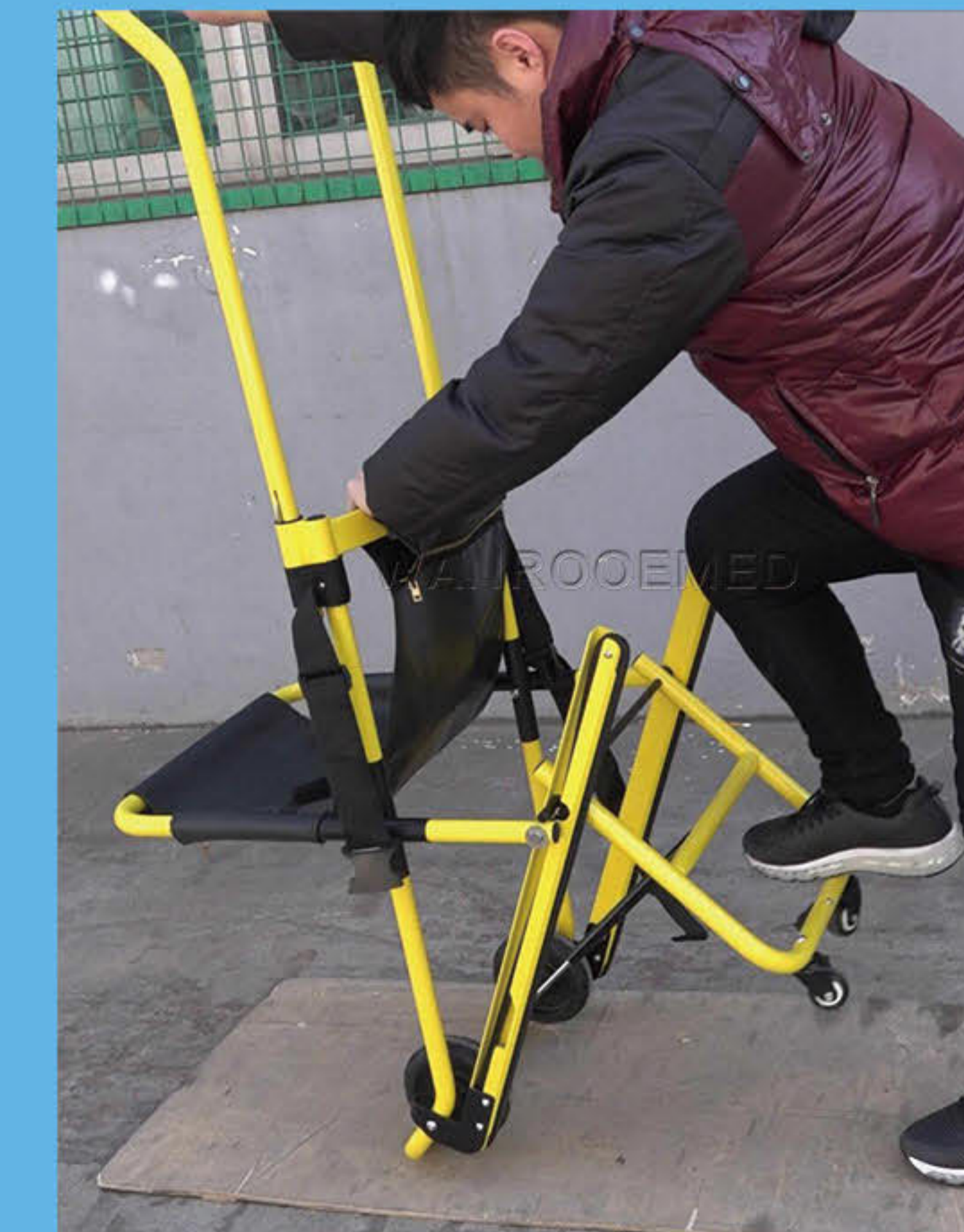

Rack open&fold is controlled by gas spring, hold the rear handle, one leg step, fold the track.
仅需扶住椅子，用脚轻踩，履带便可收起



Foldable, easy for storage. super light weight only 19 lbs.
可折叠，便于储存。重量超轻仅为19磅。

EA-6F

Evacuation Chair 楼梯椅



PVC seat
PVC 舒适坐垫

Metal bucket and safety belt
金属扣和安全带



Stretchable 3 positions handles
可拉伸的3档调节手柄




With track, only one person
can push down the stretcher.
带有履带，
只需一人就可将担架推下楼梯



Backrest height adjustable,
total 4 positions
靠背可分四档调节



Rear handle autolock
后手把带自动锁

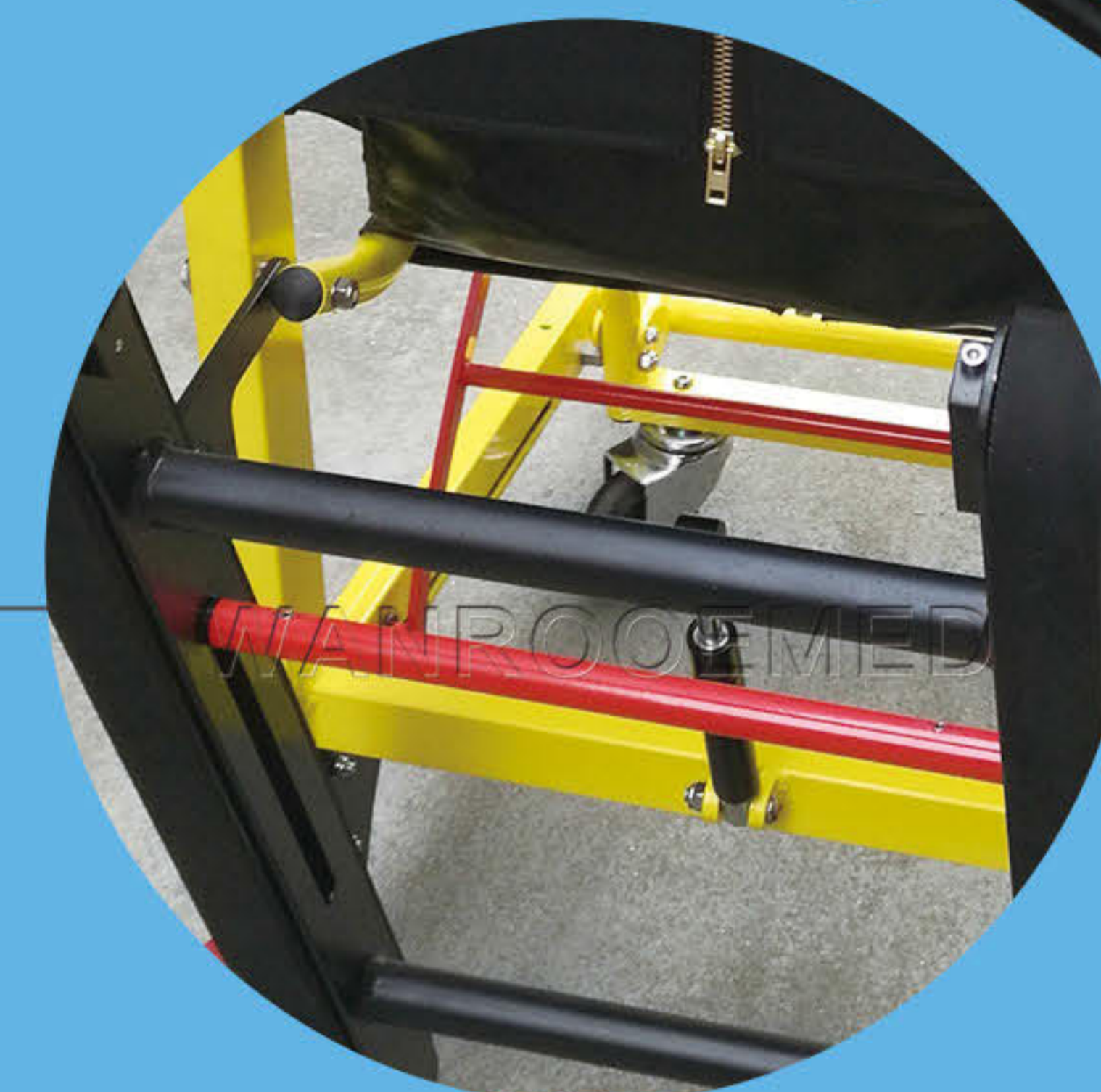

Rack fold & unfold is controlled by gas spring,
hold the rear handle, one leg step, fold the track
仅需扶住椅子，用脚轻踩，履带便可收起



High wear-resistant rubber wheels
高耐磨橡胶轮

COLOR



Red



Blue



Yellow



Green

OPTIONAL



Dust cover



Pillow



Wall bracket

Specification:

It is designed to assist in evacuating individuals easily, safely and quickly from multi-levelled buildings. The innovative sliding system make it easy to operate. With 2 METAL belts provides the security during transportation. All Metal Frame Construction provides strength, long service life, and exceptional performance with heavy patients.

WANROOEMED Evacuation chair with following features:

1. The sliding tracks adjustable: users can adjust the tightness.
2. Wide tracks for safer and easier operation during evacuation.
3. Designed with special track structure, more convenient and safer for transport.
4. Two rear lift handles.
5. Rear castors with brakes.

Optional : Mounting Wall Bracket ; Dust Cover ; Pillow.

General Color : Frame in yellow, cloth in black. Customized color available.

PRODUCT SPECIFICATION

MODEL: EA-6F

Open Size(L × W × H): 98x54x80cm

Folded Size(L × W × H): 98x54x35cm

Self weight: 15kg

Load Limit: 159kg

Package: 110x52x27cm

G.W.: 17kg

Track: High wear-resistant materials, life time 3~5 years

产品描述

型号: EA-6F

展开尺寸: 98x54x80cm

折叠尺寸: 98x54x35cm

自重: 15kg

承重: 159kg

包装尺寸: 110x52x27cm

毛重: 13kg

履带: 高耐磨材料, 使用寿命3~5年

产品说明:

本产品旨在帮助行动不便的人员从多层建筑物中, 轻松, 安全, 快速地撤离。创新的滑动系统使本产品更容易操作。2条金属带在运输过程中提供了安全保障。全金属框架结构, 强度高, 使用寿命长, 拥有运输肥胖型病人的卓越性能。

万容医疗疏散椅具有以下特点:

- 1、滑动履带可调: 使用者可调节松紧度。
- 2、超宽的履带使得疏散过程中操作更安全和更容易。
- 3、采用特殊的轨道结构设计, 运输更方便, 更安全。
- 4、两个后把手。
- 5、带刹车的后脚轮。

可选配件: 安装墙壁支架; 防尘罩; 枕头。

一般颜色: 黄色框架, 黑色布料。可定制颜色。