



**WANROOE
MEDICAL**



**WANROOE
MEDICAL**

万容机械有限公司
WANROOE MACHINERY CO., LTD.

万容机械有限公司

WANROOE MACHINERY CO., LTD.

江苏省张家港市人民东路19号国泰新天地广场1311,1313室
Room1311,1313, Guotai New World Plazza, No19, East Renmin Road,
Zhangjiagang, Jiangsu, China.

Tel:+86 512 58810663

Fax:+ 86 512 58810663

Email:info@wanrooemed.com

Http://wanrooemed.com

公司介绍 COMPANY PROFILE

万容机械有限公司是专业研发及销售各类医用设备，如 病床，急救担架，医用推车，手术床，无影灯，麻醉机等，以出口外销为主，产品已经远销到印度、波兰、乌兹别克斯坦、马来西亚、印度尼西亚、埃及等海外国家，并赢得了新老客户的好评。

我公司具有一支精干的营销队伍和完善的售后服务体系，能为你提供一站式的专业服务，我们坚持“客户至上，信誉第一，质量第一”的服务宗旨，以信誉求发展，以质量求生存，并且以合理的价格，为广大客商提供各类医疗设备。我们相信客户的成功就是我们的成功，我们同客户一起发展，愿为国际医疗事业做出我们的贡献。热烈欢迎广大客商携手共进，共谋发展！

WANROOEMED is a multiple company which specializes in medical equipment researching, manufacturing, marketing and exporting. Our main products include: electric bed, manual bed, hospital stretcher, operating table, delivery table, operating light, anesthesia machine etc.

From establishment till now, WANROOEMED has been exported to more than 160 countries. We provide turn-key hospital furniture solution for hospital project.

We serve the professional intermediaries from all countries. among them, we have been OEM experience for many famous brands for years.

We have partners all over the world: Chile, Mexico, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, UK, Romania, Saudi Arabia, Philippines, Poland, United Arab Emirates, Mongolia, Bahrain, Australia, Jordan, Lebanon, Sudan, Ghana, Malaysia, South Africa, Kenya, Rwanda and other countries.

Sincerity is the base, survive through high quality. Our products is welcomed by hospital, nursing home, clinics, and we are always listening our customer's voice and improving our quality and service, and product upgrade improvement schemes deeply win the highly praise of the customer.

We believe that our clients' successes are our success, we grow up with our clients, and we are trying to make some contributions to international medical career!

We always commit to providing global enterprises with high quality medical equipment.

目录 Contents

创伤引流吸引器系列 Wound Drainage Suction Apparatus	2
急救吸引器（交/直流）系列 Emergency Aspirator (AC/DC)	3
高负压吸引器系列 High Vacuum Suction Apparatus	4
低负压吸引器系列 Low Vacuum Suction Apparatus	10
人工驱动系列 Manually Powered	11
电动吸痰器系列 Electric Phlegm Suction Apparatus	11
妇科吸引器系列 Gynecology Aspirator	14
电动洗胃机系列 Electric Gastric Lavage Machine	16
护理设备 Healthcare Equipment	17
终端吸引装置 Terminal Suction Device	18
斯曼峰产品系列零配件 SMAF Spare Parts	19
特约维修点 Maintenance Stations	21



创伤引流吸引器系列 Wound Drainage Suction Apparatus

概述：适用于创伤治疗时的负压引流及术后持续引流。
Overview: Intended for negative pressure wound therapy and postoperative drainage.

创伤持续引流吸引器
Wound Continuous Drainage Suction Unit



Vts32



可配置双瓶
Two bottles (1L)

持续 / 间歇吸引器
Continuous/Intermittent Suction Unit



VST50D (仅供外销)

- 产品特点:
- 1. 持续 / 间歇两种工作模式，间歇吸引时间可选择控制；
 - 2. 采用无油泵作负压源，噪音低，无需日常维护；
 - 3. VST50D 负压调节阀具有锁定功能，可根据需要任意设定负压值。

- Product Features:
- 1. Two operation mode: Continuous and Intermittent, working time of Intermittent mode can be set;
 - 2. Adopt oil-less pump, high vacuum, low noise;
 - 3. VST50D Vacuum regulator can be locked and controlled as needed.

项目 Item	型号 Model	Vts32	VST50D
极限负压值 Max vacuum		≥ 32KPa(240mmHg)	50KPa±10% (375mmHg)
负压调节范围 Vacuum range		2.5 KPa(18.75mmHg) ~ 极限负压值 Max	6KPa(45mmHg) ~ 极限负压值 Max
抽气速率 Flow rate		≥ 25L/min	≥ 8L/min
噪声 Noise		≤ 50dB(A)	≤ 55dB(A)
工作模式 Working mode		连续运行和间歇运行 Continuous and Intermittent	
间歇运行时间 Intermittent working time		5min 开 /2min 停 (默认值) 或 1~15min 内任意设定 5min On/2min Stop(default) or set from 1 ~ 15min	
贮液瓶 Storage bottle		1000ml (PC)	800ml (PC)
电池类型及运行时间 Battery type and working time		—	锂离子电池 Lithium battery;120min
电源 Power supply		~ 220V, 50Hz	~ 100V ~ 240V, 50/60Hz; DC 12V
输入功率 Input power		100VA	40VA
毛重 / 净重 GW/NW		8.4kg/6.8kg	5kg/3.5kg
外包装尺寸 Packing dimension		55cm×26.4cm×38cm	42cm×20cm×41cm

急救吸引器(交/直流)系列 Emergency Aspirator(AC/DC)

概述：供医疗机构作吸出患者上呼吸道中的分泌物及手术中用于吸引患者各种渗出液、冲洗液。适用于在交通工具上或患者转运途中缺少交流电源的情况下对病人实施抢救和护理。
Overview: To suck out secretion from patient's airway and exudates or flushing fluid during operation. It is suitable for emergency treatment and nursing under those situations of lack of AC power on vehicles or in transit of patients.



JX820D
JX820D-1



JX820D-2



- 产品特点:
- 1. 采用无油润滑活塞泵，设有溢流保护装置和空气过滤器；
 - 2. 采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式，电池采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接交流 100V ~ 240V，50/60Hz 或者 DC 12V 的情况下均可进行充电，有电量分段指示
 - 3. JX820D/JX820D-1 可定制墙挂式结构，安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面；
 - 4. 塑料外壳美观、轻巧，携带方便；

- Product Feature:
- 1. Adopt oil-free lubrication piston pump, equipped with over flow protection device and air filter;
 - 2. Three power supply modes: AC, DC and inner battery, which is charged by constant voltage and limited current. It can be intermittently and cumulatively charged when connected to AC 100V~240V, 50/60Hz or DC 12V with battery volume indication;
 - 3. JX820D/JX820D-1 can be fixed on the wall, vehicle or the side of wheel chair through a tailor-made bracket;
 - 4. Beautiful plastic case, light and easy to carry.

项目 Item	型号 Model	JX820D	JX820D-1	JX820D-2
极限负压值 Max vacuum		≥ 0.08MPa (600mmHg)		
负压调节范围 Vacuum range		0.01MPa (75mmHg) ~ 极限负压值 Max		
抽气速率 Flow rate		≥ 20L/min	≥ 20L/min	≥ 20L/min
噪声 Noise		≤ 65dB(A)	≤ 65dB(A)	≤ 65dB(A)
贮液瓶 Storage bottle		1000 ml (PC)	1000 ml (PC)	800 ml (PC)
电源 Power supply		~ 100V ~ 240V, 50/60Hz; DC 12V		
输入功率 Input power		110VA	110VA	110VA
电池类型 Battery type		铅酸电池 Lead acid battery	锂离子电池 Lithium battery	锂离子电池 Lithium battery
内置电池工作时间 Battery working time		≥ 25min	≥ 60min	≥ 60min
毛重 / 净重 GW/NW		外销: 6.5kg/4kg 内销: 一台装 :6kg/4kg 两台装 :12.5kg/9kg	外销: 5.5kg/3.4kg 内销: 一台装 :5.5kg/3.4kg 两台装 :11.6kg/7.8kg	6.5kg/3.4kg
外包装尺寸 Packing dimension		外销: 41cm×20.5cm×38cm 内销: 一台装 :40.5cm×20cm×36cm 两台装 :42 cm×41cm×36cm	外销 :41cm×20.5cm×38cm 内销 :一台装 :40.5cm×20cm×36cm 两台装 :42 cm×41cm×38cm	41.5cm x 21.5cm x 40cm

高负压吸引器系列 High Vacuum Suction Apparatus

概述: 高负压、大流量的医用吸引设备, 供医疗机构作吸除患者气道内的分泌物和手术时患者体内渗出物、冲洗液之用。
Overview: High vacuum, large flow medical suction equipment, intended for extracting secretion from patients' airway or exudation and flushing fluid from body cavity during operation in medical institution.

电动吸引器
Electric Suction Apparatus



YX932D

YB-DX23D

产品特点:

- 1. YX932D 采用无油润滑活塞泵, YB-DX23D 采用高效浸渍旋片真空泵;
- 2. 设有溢流保护装置, 可防止液体进入中间管道;
- 3. 标准配置为玻璃贮液瓶, 可根据需要改为 PC 塑料瓶;
- 4. 采用工程塑料和金属相结合的外形结构, 拉杆可摆动, 造型美观。

Product Features:

- 1.YX932D – oil-free lubrication piston pump, YB-DX23D -- oil-impregnated vanes pump;
- 2.Overflow protection device prevents fluid from getting into intermediate tubing;
- 3.Standard configuration is glass bottle, can be replaced by PC bottle per request;
- 4.Adopt the combination of ABS and metal material on the case with swingable rod.

项目 Item	型号 Model	YX932D	YB-DX23D
极限负压值 Max vacuum		≥ 0.09MPa(680mmHg)	≥ 0.09MPa(680mmHg)
负压调节范围 Vacuum range		0.02MPa(150mmHg) ~ 极限负压值 Max	0.02MPa(150mmHg) ~ 极限负压值 Max
抽气速率 Flow rate		≥ 32L/min	≥ 20L/min (实际 Actual ≥ 30L/min)
噪声 Noise		≤ 60dB(A)	≤ 60dB(A)
贮液瓶 Storage bottle		2500ml×2 (玻璃 glass)	2500ml×2 (玻璃 glass)
电源 Power supply		~ 220V, 50Hz	~ 220V, 50Hz
输入功率 Input power		150VA	280VA
毛重 / 净重 GW/NW		14.5kg/12kg	18 kg/16kg
外包装尺寸 Packing dimension		40.5cm×38.5cm×48.5cm	40cm×38cm×47cm

电动吸引器
Electric Suction Apparatus



YX930D

YX930D-1A

产品特点:

- 1. 采用无油润滑活塞泵, 负压高、流量大, 配备溢流保护装置和空气过滤器;
- 2. 手动和脚踏开关并联连接, 任意选用;
- 3. 整机工作平稳、噪声低、使用寿命长。

Product Features:

- 1.Adopt oil-free lubrication piston pump, high vacuum and large flow, equipped with overflow protection device and air filter;
- 2.Hand switch and foot switch connected in parallel can be selected freely;
- 3.Working stably, low noise and long life.

项目 Item	型号 Model	YX930D	YX930D-1A
极限负压值 Max vacuum		≥ 0.09MPa(680mmHg)	≥ 0.09MPa(680mmHg)
负压调节范围 Vacuum range		0.02MPa(150mmHg) ~ 极限负压值 Max	0.02MPa(150mmHg) ~ 极限负压值 Max
抽气速率 Flow rate		≥ 40L/min	≥ 32L/min
噪声 Noise		≤ 60dB(A)	≤ 60dB(A)
贮液瓶 Storage bottle		2500ml×2 (玻璃 glass)	2000ml+1000ml (PC)
电源 Power supply		~ 220V, 50Hz	~ 220V, 50Hz
输入功率 Input power		250VA	150 VA
毛重 / 净重 GW/NW		23.5kg/20kg	13.5kg/11.5kg
外包装尺寸 Packing dimension		46.5cm×42.5cm×93.5cm	40cm×37cm×58cm

电动吸引器
Electric Suction Apparatus



YX940D

- 产品特点:**
- 1. 采用无油润滑真空泵，负压高、流量大，配备溢流保护装置和过滤器；
 - 2. YX980D 配有容器转换阀，YX940D 配有悬挂式清洗杯，可供使用时放置吸引管；
 - 3. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用；
 - 4. 整机工作平稳，噪声低，容量大，操作方便。



YX980D

- Product Features:**
- 1. Adopt oil-free lubrication piston pump, high vacuum and large flow, equipped with overflow protection device and air filter;
 - 2. YX980D is equipped with change-over valve of selection jars; YX940D is equipped with rinsing cup which can be used for placing catheter during operation;
 - 3. Hand switch and foot switch connected in parallel can be selected freely;
 - 4. Working stably, low noise, high capacity and easy to operate.

项目 Item	型号 Model	YX940D	YX980D
极限负压值 Max vacuum		≥ 0.09MPa(680mmHg)	≥ 0.09MPa(680mmHg)
负压调节范围 Vacuum range		0.02MPa (150mmHg) ~ 极限负压值 Max	0.02MPa (150mmHg) ~ 极限负压值 Max
抽气速率 Flow rate		≥ 40L/min	≥ 80L/min
噪声 Noise		≤ 60dB(A)	≤ 60dB(A)
贮液瓶 Storage bottle		3000ml×2(玻璃 glass)	4000ml×2+2000ml×2(pc)
电源 Power supply		~ 220V, 50Hz	~ 220V, 50Hz
输入功率 Input power		250VA	280VA
毛重 / 净重 GW/NW		25.6kg/23kg	27kg/22kg
外包装尺寸 Packing dimension		49cm×39cm×94cm	50cm×44cm×99.5cm



电动吸引器
Electric Suction Apparatus

- 产品特点:**
- 1. 采用无油自润滑活塞泵，负压高、流量大，设有溢流保护装置和空气过滤器；
 - 2. YX932S 采用 ABS 塑料外壳，有二种贮液瓶组合方式（单瓶、双瓶）可供选择，体积小、重量轻，携带方便；
 - 3. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。

- Product Features:**
- 1. Adopt oil-free lubrication piston pump, high vacuum and large flow, equipped with overflow protection device and air filter;
 - 2. YX932S: adopt ABS plastic case, two compound modes of storage bottle(single, double), small size, light weight, easy to carry;
 - 3. Hand switch and foot switch connected in parallel can be selected freely.



YX920S



YX932S

Apparatus



可配置双瓶
Two bottles (1L、2L)

项目 Item	型号 Model	YX920S	YX932S
极限负压值 Max vacuum		≥ 0.09MPa(680mmHg)	≥ 0.09MPa(680mmHg)
负压调节范围 Vacuum range		0.02MPa (150mmHg) ~ 极限负压值 Max	0.02MPa (150mmHg) ~ 极限负压值 Max
抽气速率 Flow rate		≥ 32L/min	≥ 32L/min
噪声 Noise		≤ 60dB(A)	≤ 60dB(A)
贮液瓶 Storage bottle		1000ml (PC)	2000mL (PC, 标准配置)
电源 Power supply		~ 220V, 50Hz	~ 220V, 50Hz
输入功率 Input power		150VA	150VA
毛重 / 净重 GW/NW		9.5kg/8kg	8kg/5.5kg
外包装尺寸 Packing dimension		39cm×35cm×42cm	54cm×26.5cm×38cm

电动吸引器
Electric Suction Apparatus



YB-DX23B

产品特点:

- 1.YB-DX23B 采用高效浸渍旋片泵;
- YX932M/YB-MDX23 采用膜片式泵;
- 2. 设有溢流保护装置, 可防止液体进入中间管道;
- 3. 手动开关和脚踏开关并联连接, 任意选用;
- 4. 整机工作平稳, 噪声低, 使用寿命长。




YX932M / YB-MDX23
膜式 Diaphragm Type

Product Features:

- 1.YB-DX23B: pump with oil impregnated vanes;
YX932M/YB-MDX23: diaphragm type pump;
- 2.Equipped with overflow protection device to prevent the liquid from going into the middle pipe;
- 3.Hand switch and foot switch connected in parallel can be selected freely;
- 4.Working stably, low noise, long life.

项目 Item	型号 Model	YB-DX23B	YX932M / YB-MDX23
极限负压值 Max vacuum		≥ 0.09MPa(680mmHg)	≥ 0.093MPa(698mmHg)
负压调节范围 Vacuum range		0.02MPa (150mmHg) ~ 极限负压值 Max	
抽气速率 Flow rate		≥ 30L/min	YX932M: ≥ 32L/min, YB-MDX23: ≥ 20L/min
噪声 Noise		≤ 55dB(A)	≤ 60dB(A)
贮液瓶 Storage bottle		2500ml×2 (玻璃 glass)	2500ml×2 (玻璃 glass)
电源 Power supply		~ 220V, 50Hz	~ 220V, 50Hz
输入功率 Input power		280VA	380VA
毛重 / 净重 GW/NW		24.5kg/22kg	28kg/25kg
外包装尺寸 Packing dimension		46.5cm×42.5cm×92cm	46.5cm×42.5cm×92cm

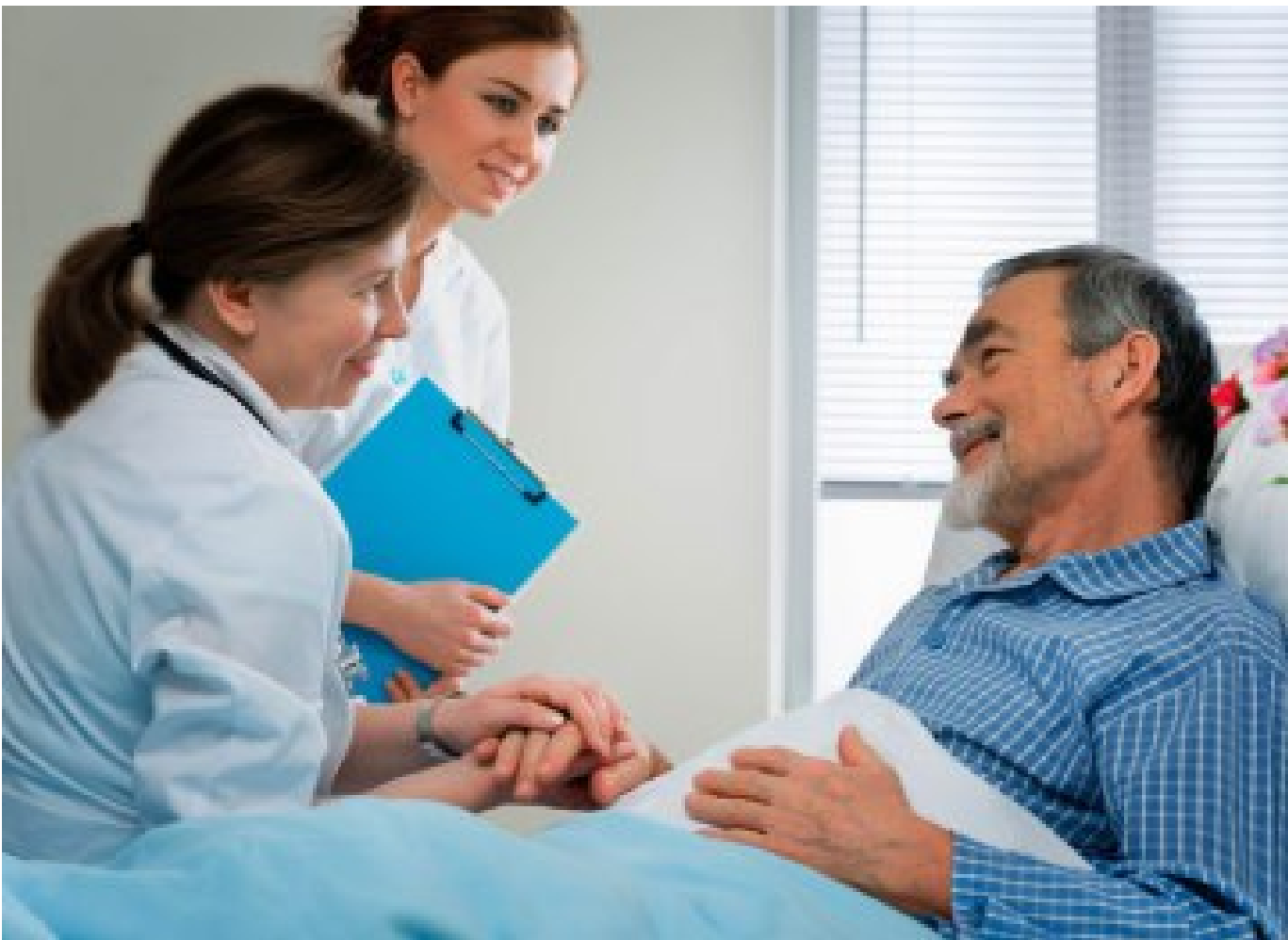

内窥镜吸引器
Endoscope Suction Apparatus

产品特点:

用于在胃、肠、结肠支气管等多种类型的内窥镜检查时, 对胃液、肠液及各种残留液体的吸引, 从而提高内窥镜图像的观察清晰度。

Product Features:

It is intended to suck out mucus from stomach and intestines and various residual liquid when doing endoscopy to enhance the image definition.

项目 Item	型号 Model	NKJX-2
极限负压值 Max vacuum		≥ 0.085MPa(640mmHg)
负压调节范围 Vacuum range		胃 Stomach: 0.04MPa(300mmHg) 肠 Intestines: 0.075MPa(560mmHg)
抽气速率 Flow rate		≥ 24L/min
噪声 Noise		≤ 60dB(A)
贮液瓶 Storage bottle		1500ml×2(玻璃 glass)
电源 Power supply		~ 220V, 50Hz
输入功率 Input power		110VA
毛重 / 净重 GW/NW		13.5kg/11.5kg
外包装尺寸 Packing dimension		38cm×37cm×55cm



NKJX-2

低负压吸引器系列 Low Vacuum Suction Apparatus

概述：低负压系列产品适用于各级医疗机构对患者进行手术后作连续引流。
Overview: The low vacuum product series is suitable for conducting post-operation continuous drainage for the patient.

低压（羊水）吸引器
Low Vacuum(Amniotic Fluid) Suction Apparatus



DYX-1A

- 产品特点:
- 1. 采用无油电磁泵,无需日常维护和保养,并可长期连续使用;
 - 2. 设有溢流保护装置和空气过滤器;
 - 3. 负压调节装置具有锁定功能,可根据需要任意设定负压值;
 - 4. 塑料箱壳美观、耐用,结构紧凑、重量轻、携带方便。

- Product Features:
- 1. Adopt oil-free electromagnetic pump, no need of daily maintenance, can be used continuously in long term;
 - 2. Equipped with over flow protection device and air filter;
 - 3. The vacuum regulator can be locked and set pressure upon requirements;
 - 4. Beautiful plastic case, durable, compact size, light weight, easy to carry.

低压（大流量）吸引器
Low Vacuum(Large Flow) Suction Apparatus



DY-3

低压吸引器
Low Vacuum Suction Apparatus



DYX-2A

项目 Item	型号 Model	DYX-1A	DYX-2A	DY-3
极限负压值 Max vacuum		18KPa±1.5KPa(135 mmHg±11mmHg)	15KPa±1.5KPa(110±11mmHg)	17KPa~20KPa (128mmHg~150mmHg)
负压调节范围 Vacuum range		2KPa ~极限负压值 Max		
抽气速率 Flow rate		≥ 6L/min	≥ 700 ml/min (吸水量 water regains)	≥ 20L/min
噪声 Noise		≤ 55dB(A)	≤ 55dB(A)	≤ 60dB(A)
贮液瓶 Storage bottle		1000ml (PC)	1000ml (PC)	2000ml (PC)
电源 Power supply		~ 220V, 50Hz	~ 220V, 50Hz	~ 220V, 50Hz
输入功率 Input power		30VA	15VA	100VA
毛重 / 净重 GW/NW		3.2kg/2.5kg	3.5kg/2.5kg	6.3kg/4.3kg
外包装尺寸 Packing dimension		39cm×19cm×34cm	38.5cm×18.5cm×35cm	41cm×20.5cm×42cm

人工驱动系列 Manually Powered

脚踏吸引器 Pedal Suction Apparatus



TX-1

- 产品特点:
- 本吸引器主要用于医疗单位对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术,以及吸除患者气道内分泌物和手术时体内的渗出物、冲洗液。使用范围广泛,适用于无电源地区以及一般地区临时断电急用。该吸引器体积小、结构紧凑、操作简单、携带方便。

项目 Item	型号 Model	TX-1
极限负压值 Max vacuum		≥ 0.08MPa(600mmHg)
封压时负压回降 (Fall of vacuum when sealed)		≤ 0.005MPa(38mmHg)/10min
贮液瓶 (Storage bottle)		1000ml (玻璃 glass)
毛重 / 净重 GW/NW		5.5kg/3.5kg
外形尺寸 (Packing dimension)		36.5cm×27.5cm×30.5cm

- Product Features:
- This machine is mainly used to perform abortion surgery, or suck out secretion from patient* s airway and exudates or flushing fluid during operation. It can be widely used in different situations, especially where there is no power supply or emergency treatment when power supply is turned off. It is small in size, compact in structure, easy to operate and carry.

电动吸痰器系列 Electric Phlegm Suction Apparatus

手提式吸痰器
Portable Phlegm Suction Apparatus



DXT-1

- 产品特点:
- 1. 适用于吸出患者上呼吸道中的分泌物,是医疗单位及家庭急救、护理的理想医疗设备;
 - 2. 采用,负压调节系统可作无级调压,配备溢流保护装置及空气过滤器;
 - 3. 结构紧凑,体积小,重量轻,操作简单,携带方便。

项目 Item	型号 Model	DXT-1
极限负压值 Max vacuum		≥ 0.08MPa(600mmHg)
负压调节范围 Vacuum range		0.02MPa (150mmHg) ~极限负压值 Max
抽气速率 Flow rate		≥ 22L/min
噪声 Noise		≤ 60dB(A)
贮液瓶 Storage bottle		1000ml×2 (玻璃 glass)
电源 Power supply		~ 220V, 50Hz
输入功率 Input power		110VA
毛重 / 净重 GW/NW		9.5kg/8kg
外包装尺寸 Packing dimension		37cm×32cm×34cm

- Product Features:
- 1.Intended for absorbing secretion from patient's upper respiratory, ideal model for emergency treatment and nursing;
 - 2.Adopt oil-free lubrication piston pump, stepless vacuum control, equipped with overflow protection device and air filter;
 - 3.Compact structure, small size, light weight, easy operation, convenient to carry.

电动吸痰器系列 Electric Phlegm Suction Apparatus

手提式吸痰器
Portable Phlegm Suction Apparatus



- 产品特点:**
- 1. 适用于吸出患者上呼吸道中的分泌物，是医疗单位及家庭急救、护理的理想医疗设备；
 - 2. 采用无油润滑活塞泵作负压源，负压调节系统可作无级调压，配备溢流保护装置及空气过滤器；
 - 3. 采用设计新颖的塑料箱壳，美观、轻巧、携带方便。

- Product Features:**
- 1.Intended for absorbing secretion from patient's upper respiratory, ideal model for emergency treatment and nursing;
 - 2.Adopt oil-free lubrication piston pump, stepless vacuum control, equipped with overflow protection device and air filter;
 - 3.Innovatively designed plastic case, good shape, light weight and convenient to carry.

项目 Item	型号 Model	SXT-1A	SXT-5A
极限负压值 Max vacuum		≥ 0.08MPa(600mmHg)	≥ 0.08MPa(600mmHg)
负压调节范围 Vacuum range		0.02MPa (150mmHg) ~极限负压值 Max	
抽气速率 Flow rate		≥ 22L/min	≥ 20L/min
噪声 Noise		≤ 60dB(A)	≤ 60dB(A)
贮液瓶 Storage bottle		1000ml(PC)	1000ml(PC)
电源 Power supply		~ 220V, 50Hz	~ 220V, 50Hz
输入功率 Input power		110VA	110VA
毛重 / 净重 GW/NW		6kg/4kg	外销：6.5kg/4kg 内销：一台装：5.5kg/4kg 两台装：13kg/8kg
外包装尺寸 Packing dimension		54.5cm×26cm×37.5cm	外销：41cm×21cm×38.5cm 内销：一台装：39.5cm×20cm×36cm 两台装：43cm×42cm×39cm

小儿吸痰器
Children Absorb Phlegm Unit



- 产品特点:**
- 1. 适用于吸出小儿患者上呼吸道中的分泌物，是医疗单位及家庭急救、护理的理想医疗设备；
 - 2. 采用无油真空泵，负压调节系统可作无级调压，配备溢流保护装置及空气过滤器；
 - 3. 体积小、噪声低、操作简单、重量轻、携带方便。

- Product Features:**
- 1.Intended for absorbing secretion from children patient's upper respiratory, ideal model for emergency treatment and nursing;
 - 2.Adopt oil-free lubrication piston pump, stepless vacuum control, equipped with overflow protection device and air filter;
 - 3.Small size, low noise, light weight, easy operation, convenient to carry.

项目 Item	型号 Model	RX-1A
极限负压值 Max vacuum		≥ 0.07MPa(525mmHg)
负压调节范围 Vacuum range		0.01Mpa (75mmHg) ~极限负压值 Max
抽气速率 Flow rate		≥ 10 L/Min
噪声 Noise		≤ 60dB(A)
贮液瓶 Storage bottle		800ml (PC)
电源 Power supply		~ 220V, 50Hz
输入功率 Input power		110VA
毛重 / 净重 GW/NW		6kg/4kg
外包装尺寸 Packing dimension		41cm×20.5cm×38cm

妇科吸引器系列 Gynecology Aspirator

概述：专门用于医疗机构对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术
Overview: Intended for abortion operation for early pregnant women in medical institution.

电动流产吸引器
Electric Abortion Suction Unit



LX-3

- 产品特点:**
- 1. 采用无油润滑活塞泵，二级负压控制，可停机操作；
 - 2. 通过脚踏开关和泄放阀的调节，控制吸引压力；
 - 3. 配置器械盘和附件贮藏柜，方便手术操作。
- Product Feature:**
- 1.Adopt oil-free lubrication piston pump, consists of two- stages vacuum system, available for shutdown operation;
 - 2.Pressure can be controlled by foot-switch for vacuum adjustment and vacuum release valve;
 - 3.Equipped with instrument tray and storage cabinet.

妇科吸引器
Gynecology Aspirator



LX920S-1

- 产品特点:**
- 1. 采用无油润滑活塞泵，设有溢流保护装置，可选择停机操作；
 - 2. 根据临床需要，可选配滤液装置，便于采样，且拆卸、清洗方便；
 - 3. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。
- Product Feature:**
- 1.Adopt oil-free lubrication piston pump, equipped with over flow protection device, available for shutdown operation;
 - 2.Filter system can be selected per clinical needs, easy to take sample, disassemble and clean;
 - 3.Hand switch and foot switch connected in parallel can be selected freely.

妇科吸引器
Gynecology Aspirator



LX840D

- 产品特点:**
- 1. 选用大流量无油润滑真空泵作负压源，收集容器内设有溢流防护装置，可选择停机操作；
 - 2. 脚踏开关上的负压泄放装置，可在停机操作时将负压由高调低，亦可用于病人端的负压释放；
 - 3. 顶部一体式的器械盘供使用时放置手术器械包或其它物品；
 - 4. 储物箱内可放置电源线和脚踏开关，便于机器停用时收藏。
- Product Feature:**
- 1.Large flow oil-free lubrication piston pump, with over flow protection device in collection bottle, available for shutdown operation;
 - 2.Vacuum release valve fitted on the foot switch is used for reducing vacuum during shutdown operation and releasing pressure applied to patient.
 - 3.Surgical instruments set or some other objects can be put on the integrated instrument tray on the top;
 - 4.Power cord and pedal switch can be put into the storage box, which is easy for collection when stopping use.



项目 Item	型号 Model	LX-3	LX920S-1
极限负压值 Max vacuum		≥ 0.09MPa(680mmHg)	≥ 0.09MPa(680mmHg)
负压调节范围 Vacuum range		0.02MPa(150mmHg) ~极限负压值 Max	0.02MPa(150mmHg) ~极限负压值 Max
抽气速率 Flow rate		≥ 15L/min	≥ 20L/min (实际 Actual ≥ 32L/min)
噪声 Noise		≤ 60dB(A)	≤ 60dB(A)
贮气瓶 Storage bottle(gas)		2500ml×2 (玻璃 glass)	—
贮液瓶 Storage bottle		500ml×2 (玻璃 glass)	1000ml (PC)
电源 Power supply		~ 220V, 50Hz	~ 220V, 50Hz
输入功率 Input power		150VA	150VA
毛重 / 净重 GW/NW		24kg/20kg	9.5 kg/8kg
外包装尺寸 Packing dimension		46.5cm×42.5cm×93.5cm	39cm×36cm×42cm

电动洗胃机
Electric Gastric Lavage Machine



DXW-A

- 产品特点:
- 1. 洗胃迅速、干净，对胃壁粘膜无损伤;
 - 2. 具有手控和自控二种操作功能，易于调整和控制;
 - 3. 设有故障声光提示装置，便于故障的排除和设备维修。

- Product Feature:
- 1. Swift and clean gastric lavage and no gastric mucosal injury;
 - 2. Two operating mode: manually and automatically, easy to adjust and control;
 - 3. Equipped with audible and visual cues device to help on fault remove and maintenance.

全自动洗胃机
Full-automatic Gastric Lavage Apparatus



DXW-2A

- 产品特点:
- 1. 采用膜片泵，电气控制采用压力传感器和 CPU 微机控制;
 - 2. 采用换向阀结构和压力控制系统，使管路更畅通;
 - 3. 面板设有计数和模拟压力显示状态;
 - 4. 设有冲、吸液量平衡装置。

- Product Feature:
- 1. Powered by diaphragm pump and adopt pressure sensor and CPU microprocessor control on electric control;
 - 2. Adopt reversing valve structure and pressure control system to keep the pipeline unblocked;
 - 3. The status of counter and simulation pressure is displayed on the control panel.

项目 Item	型号 Model	DXW-A	DXW-2A
流量 Flow rate		≥ 2L/min	≥ 2L/min(口腔插管档 Oral intubation) ≥ 1L/min(鼻腔插管档 Nasal intubation)
冲液量 Rinse capacity		250 ~ 350ml/ 次 time	250 ~ 350ml/ 次 time
吸液量 Suction capacity		300 ~ 450ml/ 次 time	300 ~ 450ml/ 次 time
压力控制 Pressure control		冲、吸压力设定为 (set rinse and suction pressure at): 47 ~ 67KPa	
噪声 Noise		≤ 60dB(A)	≤ 65dB(A)
过滤瓶 Filter bottle		800ml (PC) ×2	—
电源 Power supply		~ 220V, 50Hz	~ 220V, 50Hz
输入功率 Input power		250VA	110VA
毛重 / 净重 GW/NW		23kg/18kg	12 kg/10kg
外包装尺寸 Packing dimension		46.5cm×42.5cm×93.5cm	50cm×42cm×31cm

概述: 医疗气床垫系列产品供长期卧床病人作预防褥疮用。对有褥疮和身体局部发生红肿、溃烂的患者，经药物治疗后，再配合使用医疗喷气气床垫，对褥疮及伤口的愈合起到积极的作用。

Overview: Medical Air-Jet Air Mattress series is particularly designed to provide bed preventive healthcare for patients remaining in bed for a long period of time and suffering bedsores. For patients with somewhat swelling and ulceration, such mattress works well on treatment of bedsores and wounds following medicine administration.

医疗喷气气床垫
Medical Air-Jet Air Mattress



YPD-1

YPD-2
(波动式 Fluctuation)

- 产品特点:
- 1. 通过微孔喷出的干燥空气能降低被褥中的湿度，置换污浊空气，抑制细菌生长，结合气床垫柔软的支撑，共同构成防治褥疮的有效机理;
 - 2. YPD-1 气床垫面料为尼龙 PVC 布料; YPD-2 气床垫面料有尼龙 PVC、尼龙 PU 两种;
 - 3. 高品质的电磁驱动的气泵，噪音低、寿命长、性能稳定。

- Product Features:
- 1. Working principle: to reduce the humidity in the beddings, replace foul air through dry air jetted from the small holes, suppressing the growth of microbes, which can prevent and cure bed sore effectively together with the soft bearing of air mattress;
 - 2. The air mattress fabric of YPD-1 is Nylon PVC, while that of YPD-2 can be PVC or PU based on requirement;
 - 3. Adopt high-quality electromagnetic pump with low noise, long life and stable performance.

项目 Item	型号 Model	YPD-1	YPD-2
电压 Voltage		~ 220V, 50Hz	~ 220V, 50Hz
耗电量 Power		11VA	11VA
最大允许工作压力 Max working pressure		15 KPa ~ 20 KPa (220V 时)	15 KPa ~ 20 KPa (220V 时)
噪音 Noise		≤ 45dB(A)	≤ 45dB(A)
气垫尺寸 Size of air mattress		190cm×82cm	190cm × 90cm
毛重 / 净重 GW/NW		一台装 : 6kg/5 kg 两台装 : 13kg/10kg	一台装 : 7kg/6 kg 两台装 : 15kg/12kg
外包装尺寸 Packing dimension		一台装 : 36cm×23.5cm×32cm 两台装 : 50.5cm×39cm×35.5cm	一台装 : 36cm×23.5cm×39.5cm 两台装 : 48.5cm×37.5cm×42cm

概述：该系列产品适用于医疗机构配合中央吸引设备吸除患者气道内分泌物，手术时吸除患者体内渗出液和冲洗液。
Overview: This series is intended for extracting secretion from patients' airway or exudation and flushing fluid from body cavity during operation in medical institution.



ZX2Y-1 负压调节器
Vacuum Regulator



ZX9Y-1 负压调节器
Vacuum Regulator

产品特点:

- 1. 膜片式调压结构，负压调节器在调节范围内，任意可调，并设有防正压保护装置和溢流保护装置；
- 2. ZX2Y-1 调节器——控制开关设有 REG/OFF/FULL 三种状态：REG 为低压吸引状态，具有负压调节功能；FULL 为抽吸负压自由状态；OFF 为关闭状态；
- 3. ZX9Y-1 调节器——控制开关设有 ON/OFF 两种状态：ON 为开启状态，具有负压调节功能；OFF 为关闭状态。

Product Feature:

- 1. Diaphragm-type regulating structure, regulator can adjust at will in the adjustable range; is equipped with protection device and overflow protection device;
- 2. Regulator of ZX2Y-1——Three states of control switch “REG/OFF/FULL” ; REG is low vacuum suction state, can be adjusted; FULL is free vacuum suction state; OFF is inactive state;
- 3. Regulator of ZX2Y-9——Two states of control switch ” ON/OFF” ; ON is open state, vacuum can be adjusted; OFF is inactive state.

项目 Item	型号 Model	ZX2Y-1	ZX9Y-1
负压调节范围 Vacuum range		3KPa ~ 20KPa (23mmhg ~ 150mmhg)	0.02MPa ~ 0.09MPa (150mmhg ~ 680mmhg)
抽气速率 Flow rate		“REG” 和 “FULL” 状态均≥ 20L/min	≥ 30L/min
贮液瓶 Storage bottle		2000ml×2 (PC)	2000ml×2 (PC)
毛重 / 净重 GW/NW		9.5kg/7kg	9.5kg/7kg
外包装尺寸 Packing dimension		40cm×37cm×58cm	38cm×37cm×55cm



聚碳酸酯无毒储液瓶 (3L、4L)
Non-toxic PC Jar



聚碳酸酯无毒储液瓶 (800ml、1L、2L)
Non-toxic PC Jar



洗胃机瓶
Jar of Gastric Lavage Machine



一次性废液袋 (1L、2L)
Disposable Suction Liner
适用于 PC 瓶 (Applied to PC bottle)



流产引流瓶 (500ml)
Abortion Drainage Jar

脚踏引流瓶 (1L)
Pedal Drainage Jar

大口瓶塞 (塑料)
Jar Stopper(Plastic)



玻璃瓶 (5L、4L、3L、2.5L、1.5L、1L)
Glass Jar

医用真空表
Medical Vacuum Gauge




调节阀
Regulating Valve

脚踏开关
Pedal Switch



负压值: 25kPa
Negative Pressure Value
抽气速率: 8L/min
Flow Rate

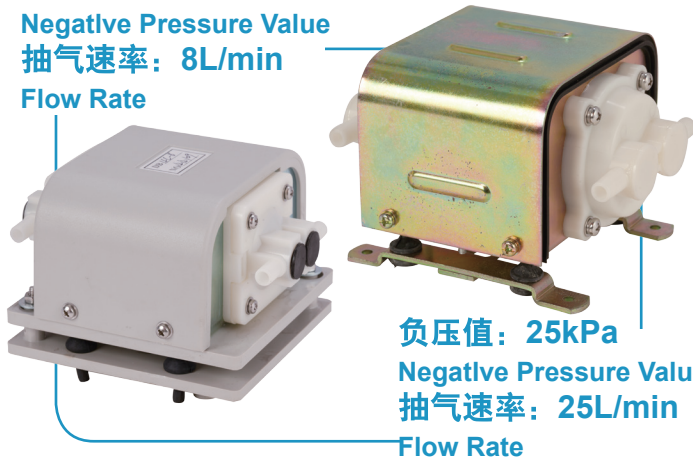


电磁泵 (DB4A)
Electromagnetic Pump

电磁泵 (DB25)
Electromagnetic Pump


负压值: 25kPa
Negative Pressure Value
抽气速率: 25L/min
Flow Rate

吸引软导管 (2m)
Suction Hose

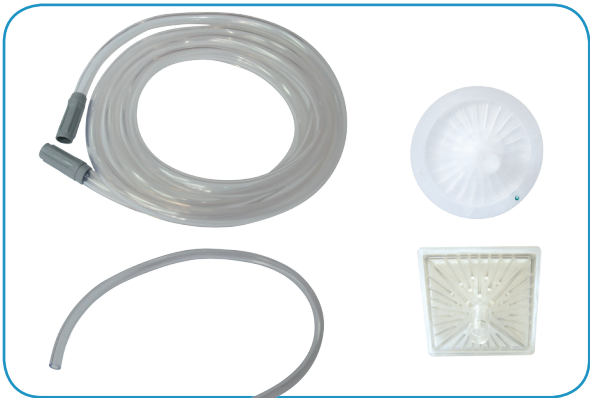

吸引软管
Suction Soft Tube

空气过滤器
Air Filter

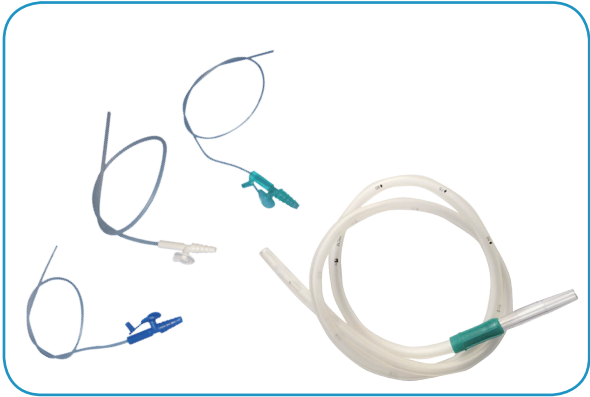

吸痰管 (F6,8,12)
Suction Catheter

胃管
Stomach Tube



电磁水泵
Electromagnetic Water Pump

地区	公司名称	联系电话
北京	北京百强医疗器械有限责任公司	010-83513542
	北京天泽企业发展有限责任公司王府井医疗器材公司	010-65138146
天津	波利特(天津)国际工贸有限公司	022-23319985
辽宁	沈阳明翔盛源商贸有限公司	024-23830623
	辽宁迅达器化玻物贸有限责任公司	0416-4166561
	大连辽南金瑞医疗器械有限公司	0411-87682937
吉林	吉林省诚信医疗设备有限公司	0431-88951223
	吉林省超凡医疗设备有限公司	0431-88656556
黑龙江	哈尔滨市赢合医疗设备有限公司	0451-88981333
广东	广州器化医疗设备有限公司	020-81942422
广西	南宁申广泰医疗器械有限公司	0771-2826115
	南宁三车医疗器械有限公司	0771-2806705
江西	江西省医科工贸有限公司	0791-86610788
福建	福州健辉医疗设备有限公司	0591-83940891
海南	海南科普生医疗器械有限公司	0898-66215355
四川	成都市华粤医疗器械贸易有限公司	028-86139718
云南	昆明锦邦经贸有限公司	0871-68233388
山东	济南新城医疗器械有限公司	0531-87907166
	菏泽市弘业医疗器械有限公司	0530-5517989
	济宁长生医疗器械有限公司	0537-21022808
	临沂市康泰医疗器械有限责任公司	0539-8160163
	临沂市康平医疗器械有限公司	0539-8160112
	潍坊益生源经贸有限公司	0536-6106955
安徽	合肥康和医疗器械有限公司	0551-63465431
	阜阳太荣医疗器械有限公司	0558-2253005
河北	河北省先进医疗器械有限责任公司	0311-87042731
山西	山西省卫生厅科教医疗器械供应站	0351-4184805
内蒙古	包头市海华医疗器械有限责任公司	0472-4165861
河南	郑州科发医疗器械有限公司	0371-63910396
	郑州中亚医疗器械有限公司	0371-63854700
	河南奥德医疗器械有限公司	0371-56537200
	洛阳新升科贸有限公司	0379-64855702
	商丘市医疗器械经销有限公司	0370-2311063
陕西	西安卫康医疗器械服务部	029-84629160
甘肃	甘肃博爱医疗投资有限公司	0931-2606499
	兰州市乐康医疗器械有限公司	15693322797
新疆	新疆博尔特商贸有限公司	0991-5875905