



万容机械有限公司

WANROOE MACHINERY CO., LTD.

江苏省张家港市人民东路19号国泰新天地广场1311,1313室

Add:Room1311,1313, Guotai New World Plazza, No19,

East Renmin Road,Zhangjiagang, Jiangsu, China.

Tel:+86 512 58810663

Fax:+ 86 512 58810663

Email:info@wanrooemed.com

Http://wanrooemed.com

The products described herein,including without limitation,product features,specifications, designs,availability are subject to change by WANROOEMED at any time without notice.



源自台湾 / 人机工程学设计 / 个性化定制

移动医疗推车专业制造商



Originate From Taiwan
ERGONOMIC DESIGN MOBILE
MEDICAL CARTS





创造价值
科技无处不在……

Technology Is Everywhere To
Create Value



中国智能移动医疗
推车专家

Intelligent Mobile Medical Carts Specialists

万容Sunny系列医疗推车符合人体工学原理，在提升医疗行业信息化水平的同时，着力改善医护人员使用体验的舒适度，可以依据实际工作要求，将IT设备放置到推车上，轻松实现自由移动，随时掌握病患情况和高效工作。

针对医院对于卫生、清洁环境的严苛要求，推车表面由铝制、优质塑料和镀锌钢制成，采用隐藏式走线系统和独有的恒力双轨调节升降专利技术，易于清理、有助于控制感染的外观设计及材质，有效将产品u 的有害成分控制到最低，所使用的化学品安全规范，通过RoHS、REACH等多项n际认证。产品包装符合欧盟(94/62/EC)包装标准，绿色环保。可依据客户定制化服务为医疗系统信息化服务提供全面保障。

Sunny type medication cart accords with principles of ergonomics,improving health-care information technology, making computing comfortable, place IT equipment on the cart according to actual requirement, move the cart freely, find out patient information at any time, work efficiently.

Cart is made of alloy, quality plastic and galvanized steel to satisfy hospital's requirement of environment cleanness. All materials conform to RoHS and REACH and packing conform to EU 94/62/EC packaging standard. Gallardo cart use patent technology of concealed cable system and constant double rail adjustment of height. We can provide customized non-standard products according to customer's requirements.

源自台湾/人机工程学设计

完整移动医疗推车解决方案

Integrated Mobile Medical Carts Solutions

凭借十年医疗领域之实践经验，在Sunny系列的移动医疗设备中成功融入了电子病历、医护保健、远程诊疗、信息共享、移动业务处理等功能，为医院、康复中心、健康会所提供了完整的智能化移动诊疗解决方案。

Sunny智能医疗推车搭配有超流畅的医疗专用静音脚轮，隐藏式外部设备托盘，可方便放置打印机、投影仪等智能化设备，左右滑动的鼠标托盘和鼠标放置架，有效提高医护人员输入数据时的舒适度。选配的带锁药品储存盒抽屉采用模块设计，精密滑动轨道轻巧坚固。

By virtue of 10 years practical experience, Sunny medical cart combines with EMR, healthcare, telemedicine, information sharing, mobile work functions, which provides full intelligent mobile medical solutions for hospital, rehabilitation centre and health club.

Sunny intelligent medical carts is installed with silent medical casters, sliding tray for printer, projector and other small device, sliding keyboard tray with left/right sliding mouse tray for convenient data input. Optional lockable medicine lattice drawer is modular structure, and the precision sliding rail is light and firm.

Product Application 广泛应用领域

- 1-X光工作站
1-X-ray Workstation
- 2-B超检测工作站
2-Ultrasound Imaging Workstation
- 3-手术工作站
3-Operation Workstation
- 4-化验室数据工作站
4-Lab/Information Workstation
- 5-影像分析工作站
5-Imaging Analysis workstation
- 6-病房护理
6-Sickroom/Nursing workstation

Ergonomic Design

人性化的设计理念

Sunny智能化医疗推车基于人性化设计理念，搭配有超流畅的医疗专用静音脚轮，隐藏式外部设备托盘可方便放置打印机、投影机，隐蔽式鼠标托盘和鼠标放置架，有效提高医护人员输入数据时的舒适度。

Move quietly and freely with four medical casters,hold printer and projector conveniently by concealed tray,keyboard tray with left/right mouse tray and mouse holder make computing comfortable,optional medicine storage drawer use modular design.

Height-Adjustable

恒力升降系统

基于人机工程学原理设计的产品，轻松调整推车的工作姿态。只要轻按扶手边的升降开关，440mm的升降行程轻松升高或降低台面，符合东西方用户群的各种身高。

Easily to adjust height through switch which under armrest for a comfortable position in this ergonomic workstation.440mm of height adjustment can satisfy different height required, work sitting or standing. Has very good compatibility.

Safe and Intelligent Power System

安全智能电源系统

采用密封锂电池和安全智能充电系统，提供220V或110V安全有效电力输出。液晶显示面板可实时查看用电状况，是最安全最经济高效的解决方案。

Use sealed Lithium battery with safe and intelligent charging system, supply 220V or 110V efficient power output.LCD screen on the worksurface supply a quick view function for battery information and high brilliance LED lamp tube make the keyboard operation clearly.

Move Silently and Fast

灵活快捷 / 静音移动

超流畅的医疗专用静音脚轮能够轻松地在地毯或坚硬地板上移动。只要轻轻一推，医疗推车就能迅速、平稳地做出反应，2个脚轮具有全制动控制功能。

Silence medical casters make the cart move freely on the carpet or on the hard floor.It can be moved reliably by very small force. 2 pieces of castors with brake function can stop it stably.

Modular Design


模块设计 / 多样组合

选配的带锁药品储存盒抽屉采用模块设计精密滑动轨道轻巧和坚固，安装笔记本的托盘采用抽拉设计，具有防盗锁具和防滑紧固粘条。

可选配17寸以下的笔记本电脑。

Concealed tray hold the printer and projector conveniently There is extension for accessories and additional equipment on the pivot grooves. Optional medicine storage drawer use modular design,sophisticated track is dexterous and safety.Laptop tray use drawing design,with lock and anti-slide sticker.


Compatible with laptops for the size below 17" .

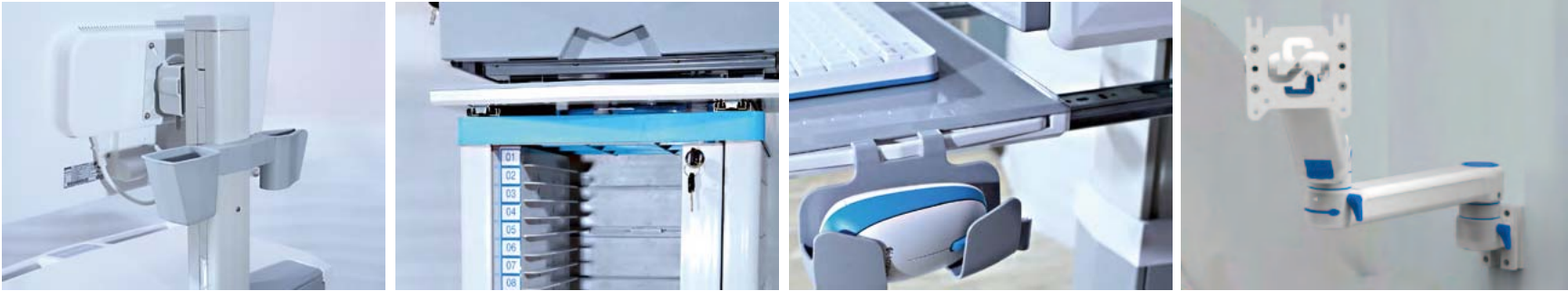


1	2	3	4
5	6	7	
8	9		

- 1 / 一体机推车 ALL-IN-ONE COMPUTER CART
- 2 / 厢体式查房车 DOSSIER ALL-IN-ONE PC CART
- 3 / 高清影像工作站 HD IMAGING WORKSTATION
- 4 / 悬臂支架 RACKET
- 5 / 治疗护理推车 NURSE/TREATMENT CART
- 6 / 笔记本推车 LAPTOP CART
- 7 / 远程医疗推车 TELEMEDICINE SYSTEM CART
- 8 / 送药车 MEDICATION CART
- 9 / LCD&笔记本升降支架 LCD & LAPTOP LIFT STAND

私人订制
医疗推车制造专家
Professional Personal Tailor for
Medical Carts

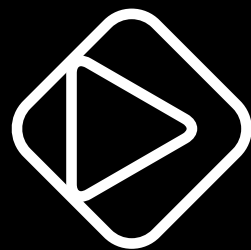

任意组合 / 随心所欲.....

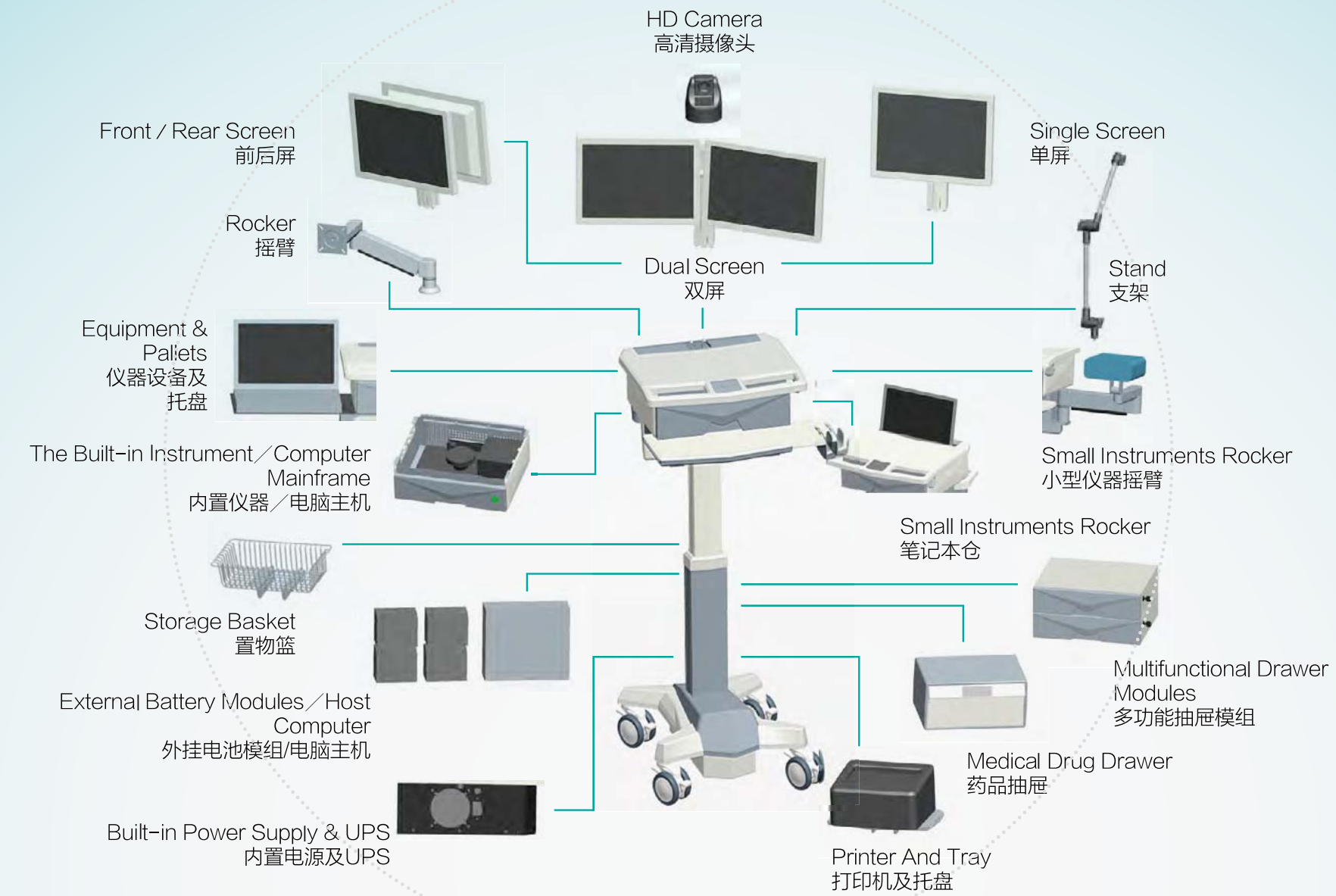



完整移动医疗推车
解决方案

Integrated Mobile Medical
Carts Solutions

智能化移动医疗推车
Intelligent Mobile Medication Cart

SUNNY

- | | |
|---|---|
| 01- All in One Mobile Cart
一体机推车 | 11- Small Medical Equipment Cart
小型设备推车 |
| 02- Workstation Carts
工作站推车 | 12- Patient Monitor Cart
监护仪推车 |
| 03- DossierAll - in - One PC Cart
厢体式查房车 | 13- Teach Vehicles Operating Cart
手术室示教车 |
| 04- Laptop Mobile Cart
笔记本推车 | 14- Telemedicine Carts
远程医疗推车 |
| 05- Nursing Classes Carts
护理类推车 | 15- Portable Plug Lithium Battery Box
便携拔插锂电池盒 |
| 06- Nurse Treatment Cart
治疗推车 | 16- Customized Reform
进口品牌推车改制 |
| 07- Bedside Charge Cart
床边收费车 | 17- Arm and Stand
悬臂支架 |
| 08- Medication Cart
送药车 | |
| 09- Endoscopic System Cart
内窥系统推车 | |
| 10- ECG Laptop Cart
心电图推车 | |




一体机推车

All-in-One Computer Cart

- 配置可升降机构，升降行程为400±20mm，升降负荷≤15Kg
工作台面高度890mm-1290mm
- 台面为ABS工程塑料，建议台面负荷≤5Kg
尺寸：533mm(L)×455mm(W)
- 抽屉内腔尺寸：
379mm(L)×298.5mm(W)×84mm(H)
- 键/鼠托盘尺寸：
键盘托盘尺寸440mm(L)×256mm(W)
鼠标托盘尺寸208mm(L)×200mm(W)
- 后置手推式储物盒
- 显示导轨立柱：386mm(L)×80mm(W)×64.5mm(H)
升降型内置恒力升降结构，升降时轻巧便捷
- 显示器挂架：挂架高度调节范围130mm，挂架可倾斜20°
建议配置≤22英寸显示器，建议承重≤10Kg
- 底座：底座为PA6框架、底座盖板为ABS工程塑料
- 脚轮：超静音医疗脚轮
- 带电源系列内设电池、UPS不间断电源保障系统
输配电支持系统

- Height adjustment range for LCD and worksurface: 400mm ± 20mm, Lifting load ≤ 15kg
Worksurface height: 890mm-1290mm
- Large, smooth ABS worksurface dimensions: 533mm(L) x 455mm (W), Proposal Table load ≤ 5kg
- Drawer inner dimensions: 379mm(L) x 298.5mm(W) x 84mm(H)
- Keyboard tray dimensions: 440mm(L) x 256mm(W)
Mouse tray dimension: 208mm(L) x 200mm(W)
- Storage Bin with handle
- LCD column dimensions: 386mm(L) x 80mm(W) x 64.5mm(H)
Height adjustable with the help of internal lift construction.
- LCD hanger: height adjustment for LCD pivot is 13cm; 20° tilting for LCD; Applied for ≤ 22 inch LCD display.
Proposal load ≤ 10kg

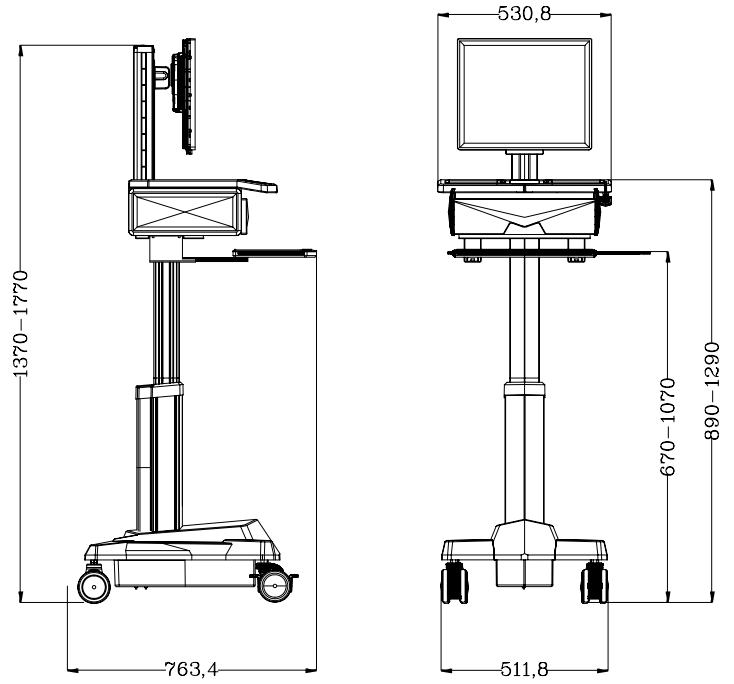

- Base: PA6 + ABS cover
- Battery and UPS system inside the base; White LEDs provide light over keyboard tray
- Front-locking silent casters




Model:
BWT-001
+Printer Tray+打
印机托盘

简易一体机推车-A型

Simple All-in-One Computer Cart A

- 整车简洁美观，可搭载≤22寸一体机电脑显示器
建议承重≤12Kg
- 键盘鼠标托架高度：776mm
- 键盘托架尺寸：440mm(L)×256mm(W)
- 伸缩式鼠标托盘尺寸：208mm(L)×200(W)
- 后置手推式储物盒，手推把高度为790.6mm
- 打印机托盘尺寸：
310mm(L)×199mm(W)，高度为297.6mm
- 推车尺寸为：648.3mm(L)×489.5mm(W)×1260.5mm(H)
内置电源线
- 脚轮：超静音医疗脚轮

- Concise and compact for 22" All-in-One computer, Proposal load ≤ 12kg
- Keyboard/mouse tray height: 776mm
- Keyboard tray dimensions: 440mm(L) x 256mm(W)
- Mouse tray dimension: 208mm(L) x 200mm(W)
- Back storage bin with handle, handle height: 790.6mm
- Printer tray dimensions: 310mm(L) x 199mm(W), height 297.6mm
- Cart dimensions: 648.3mm(L) x 489.5mm(W) x 1260.5mm(H), Built in power line
- Built in power line
- Silent medical casters

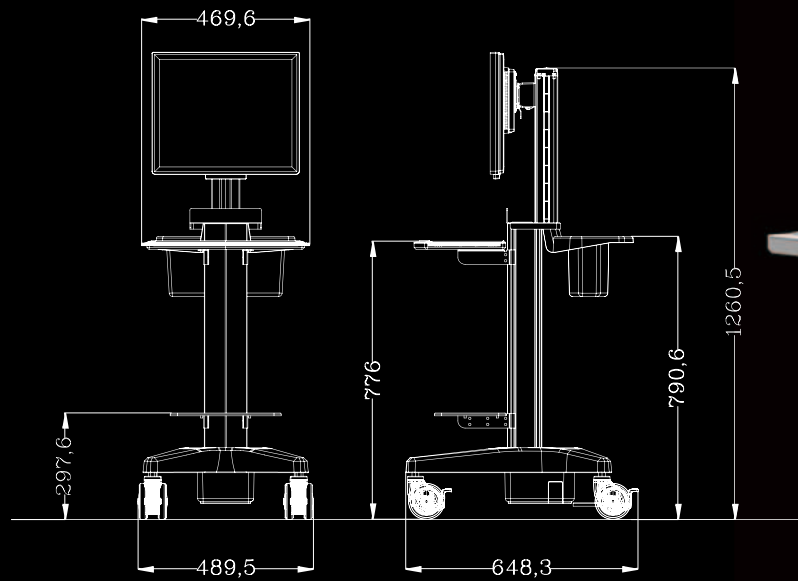

Model:
BWT-001A




简易一体机推车 – B型

Simple All-in-One Computer Cart B

- 整车简洁美观，配置可升降机构，升降行程为 $400 \pm 20\text{mm}$ ，升降负荷 $\leq 15\text{Kg}$
- 显示导轨立柱： $386\text{mm}(\text{L}) \times 80\text{mm}(\text{W}) \times 64.5\text{mm}(\text{H})$ ，内置恒力升降结构，升降时轻巧便捷，可搭载 ≤ 22 寸一体机电脑显示器，建议承重 $\leq 12\text{Kg}$
- 台面为ABS工程塑料，尺寸： $533\text{mm}(\text{L}) \times 455\text{mm}(\text{W})$ ，高度 $750\text{mm} - 1150\text{mm}$
- 可选翻转式键盘托架，键盘托架尺寸： $440\text{mm}(\text{L}) \times 256\text{mm}(\text{W})$
- 伸缩式鼠标托盘尺寸： $208\text{mm}(\text{L}) \times 200\text{mm}(\text{W})$
- 后置手推式储物盒
- 内置电源线
- 脚轮：超静音医疗脚轮
- 选配件：打印机托盘，扫描枪架，网篮

- Concise and compact,height adjustment range for worksurface: $400 \pm 20\text{mm}$,lifting load $\leq 15\text{Kg}$
- LCD column dimesion: $386\text{mm}(\text{L}) \times 80\text{mm}(\text{W}) \times 64.5\text{mm}(\text{H})$,height adjustable with the help of internal lift construction.Applied for 22 inch LCD display, proposal load $\leq 12\text{Kg}$
- Large,smooth ABS worksurface dimension: $533\text{mm}(\text{L}) \times 455\text{mm}(\text{W})$, worksurface height: $750\text{mm} - 1100\text{mm}$
- Optional rotary keyboard tray, keyboard tray dimension: $440\text{mm}(\text{L}) \times 256\text{mm}(\text{W})$
- Mouse tray dimension: $208\text{mm}(\text{L}) \times 200\text{mm}(\text{W})$
- Storage Bin with handle
- Optional Built in power line
- Silent medical casters

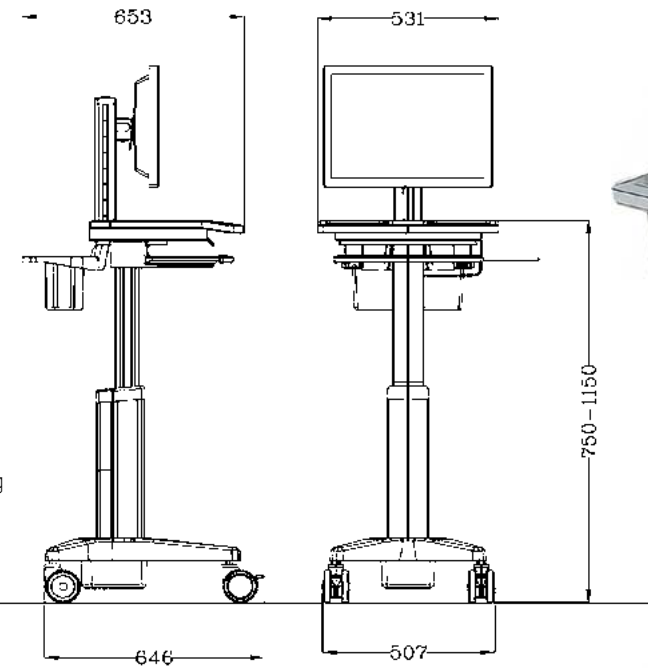

Model:
BWT-001B



简易一体机推车 – C型


Simple All-in-One Computer Cart C

- 简洁美观，立柱配置可升降气弹簧机构，脚踏板式控制方式，升降行程为 $230 \pm 10\text{mm}$ ，升降负荷 $\leq 18\text{Kg}$
- 显示器立柱： $386\text{mm}(\text{L}) \times 80\text{mm}(\text{W}) \times 64.5\text{mm}(\text{H})$ ，内置恒力升降结构，升降时轻巧便捷，可搭载 ≤ 22 寸一体机电脑显示器，建议承重 $\leq 10\text{Kg}$
- 激光切割成型金属台面，尺寸： $470\text{mm}(\text{L}) \times 352\text{mm}(\text{W})$ ，台面高度 $898\text{mm} - 1128\text{mm}$
- 伸缩隐藏式金属键盘托架，键盘托架尺寸： $470\text{mm}(\text{L}) \times 206\text{mm}(\text{W})$
- 旋转隐藏式鼠标托盘，尺寸： $189\text{mm}(\text{L}) \times 195\text{mm}(\text{W})$ ，配置鼠标架
- 台面下方可内置2组可插拔锂电池模块，可选逆变或直供输出，完全满足移动信息化的需求
- 底座为ABS塑胶外壳加金属框架复合结构，牢固可靠，美观大方
- 脚轮：超静音医疗脚轮

- Concise and compact,gas spring lifting column, pedal plate lift and adjust,height adjustment range for worksurface: $230 \pm 10\text{mm}$,lifting load $\leq 18\text{Kg}$
- LCD column dimesion: $386\text{mm}(\text{L}) \times 80\text{mm}(\text{W}) \times 64.5\text{mm}(\text{H})$,height adjustable with the help of internal lift construction.Applied for 22 inch LCD display, proposal load $\leq 10\text{Kg}$
- Metal worksurface dimension: $470\text{mm}(\text{L}) \times 352\text{mm}(\text{W})$,worksurface height: $898\text{mm} - 1128\text{mm}$
- Retractable metal keyboard tray, keyboard tray dimension: $470\text{mm}(\text{L}) \times 206\text{mm}(\text{W})$
- The rotary type mouse tray, mouse tray dimension: $189\text{mm}(\text{L}) \times 195\text{mm}(\text{W})$
- Under the table can be built into the 2 sets of plug-in lithium power supply module, optional inverter or direct output, fully meet the needs of mobile information
- Base: SPCC (steel plate) + ABS cover
- Silent medical casters



便携拔插式锂电池供电模块
lithium power supply module

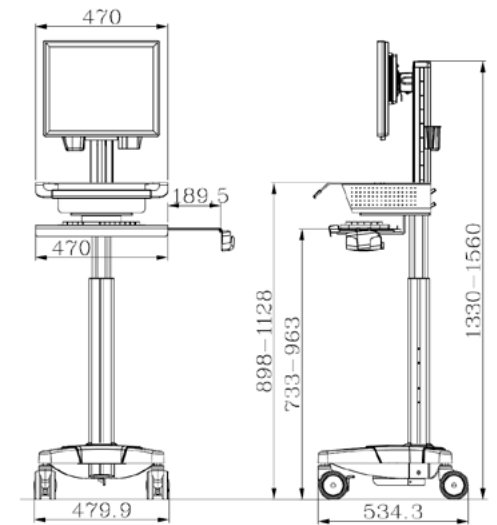


Model:
BWT-001H

简易工作站推车

Simple Workstation Cart

- 简洁实用，推车配置机箱托盘和打印机托盘，可放置各类工作站主机和打印机
- 键鼠托架和显示器托架为一体化设计，显示器固定架可搭载≤24寸电脑显示器，建议承重≤15Kg
- 键盘托架尺寸：470mm(L)×206mm(W)
- 配置旋转式可隐藏鼠标托盘，尺寸：189mm(L)×195mm(W)，配置鼠标架
- 显示器固定架后方配置手推把，方便推车的移动
- 底座为金属框架结构，牢固可靠
- 整车展开外形尺寸（不含设备）：706.5mm(L)×572mm(W)×1173mm(H)
- 脚轮：超静音医疗脚轮

- Simple and practical, the cart with PC tray and printer tray for all types of workstations PC and printers
- The integrated design of the mouse bracket and the display bracket, applied for ≤24 inch LCD display, proposal load≤15 Kg
- Keyboard tray dimensions: 470mm(L) x 206mm(W)
- The rotary type mouse tray,dimensions: 189mm(L) x 195mm(W),with mouse rack
- Behind of the LCD fix frame is handle, easy to move the trolley
- Base: SPCC (steel plate)
- Cart dimensions(not include equipment): 706.5mm(L) x 572mm(W) x 1173(H)
- Silent medical casters

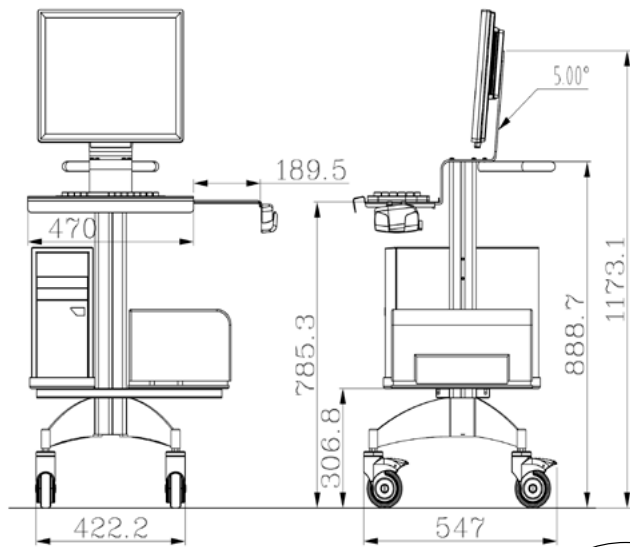

Model:
BWT-001J




工作站推车

Workstation Cart

- 主要用于工作站设备推车，大容量内置机箱，可内置各类设备主机
- 台面为ABS工程塑料，建议台面负荷≤10 Kg
尺寸：533mm(L)×455mm(W)
- 显示导轨立柱：386mm(L)×80mm(W)×64.5mm(H)，内置恒力升降结构，升降时轻巧便捷，可搭载≤22寸电脑显示器，建议承重≤8 Kg
- 工作台面高度：960 mm
- 可内置电源接线设计，方便各层设仪器设备供电
- 可配置伸缩式键盘鼠标托架，扶手式储物盒
- 整车外形尺寸：535mm(L)×650mm(W)×1350mm(H)
- 脚轮：超静音医疗脚轮

- Big capacity box for lots of workstation device
- Large, smooth ABS worksurface dimensions:533mm(L) x 455mm (W), Proposal Table load≤10kg
- LCD column dimesion: 386mm(L) × 80mm(W) × 64.5mm(H),height adjustable with the help of internal lift construction.Applied for 22 inch LCD display, proposal load≤8 Kg
- Worksurface height:960 mm
- Built in power line
- Keyboard and mouse tray, Back storage bin with handle
- Cart dimensions: 535mm(L) x 650mm(W) x 1350(H)
- Silent medical casters

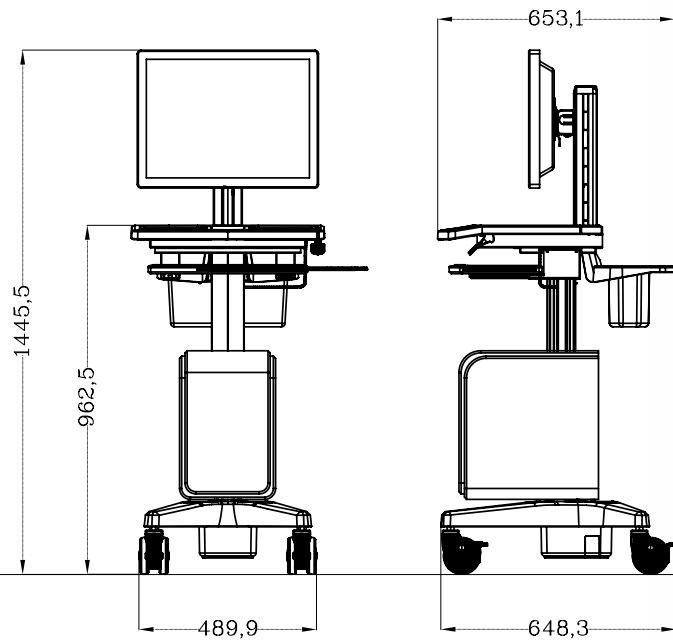

Model:
BWT-001C




高清影像工作站推车

HD Video Workstation Cart

- 配置可升降机构，升降行程为400mm，工作台面高度890mm-1290mm
升降负荷≤15Kg
- 台面为ABS工程塑料，尺寸：533mm(L)×455mm(W)
- 键/鼠托盘尺寸：键盘托盘尺寸440mm(L)×256mm(W)
鼠标托盘尺寸208mm(L)×200mm(W)
- 显示导轨立柱：386mm(L)×80mm(W)×64.5mm(H)，升降型内置恒力升降结构
- 升降时轻巧便捷，建议配置≤24英寸显示器，建议承重≤10Kg
- 显示器挂架:挂架高度调节范围130mm，挂架可倾斜20°，满足人体工学的需要
- 底座:底座为PA6框架、底座盖板为ABS工程塑料
- 带电源系列内设电池、UPS不间断电源保障系统、输配电支持系统
- 脚轮：超静音医疗脚轮

- 内置电脑标准配置：
CPU: Intel Xeon E3 1230V2+
主板：华硕H61
内存：金士顿 4G/1333
显卡：杰微610 1G
硬盘：WD 500G/SATA
高性能视频采集卡

- Height adjustment range for LCD and worksurface: 400mm
Worksurface height: 890mm-1290mm, Lifting load ≤15kg
- ABS worksurface dimensions: 533mm(L) x 455mm(W)
- Keyboard tray dimensions: 440mm(L) x 256mm(W)
- Mouse tray dimension: 208mm(L) x 200mm(W)
- LCD column dimensions: 386mm(L) x 80mm(W) x 64.5mm(H)
Height adjustable with the help of internal lift construction. Proposal load ≤10kg
- LCD hanger:height adjustment for LCD pivot is 13cm; 20° tilting for LCD for ergonomic comfort

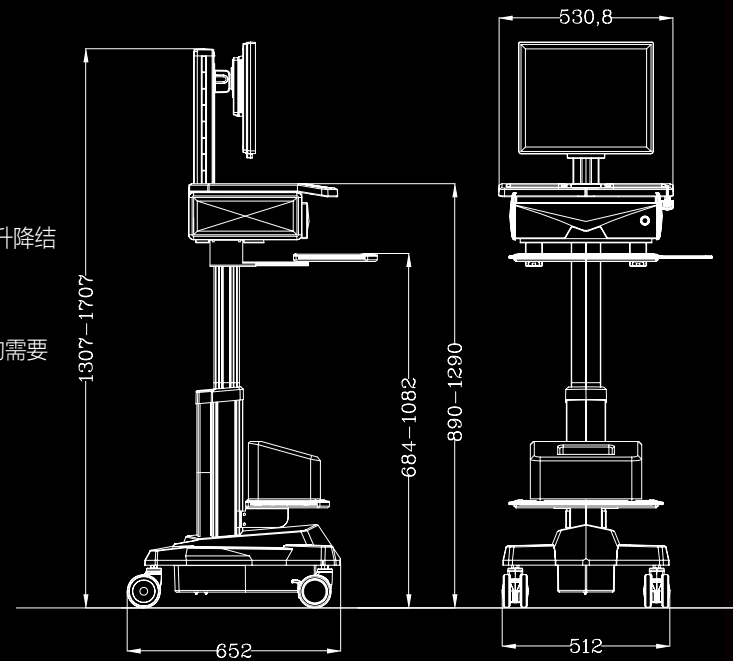

- Base: PA6 + ABS cover
- Optional: Battery and UPS System
- Silent medical casters
- Built-in computer host specification:
CPU: Intel Xeon E3 1230V2+
Mother board: Asus H61
Memory: 4G/1333
Graphics card: JW-610 1GB
HD: WD 500G/SATA
Video Capture Card

Model:
BWT-001D




厢体式查房车

Dossier All-in-One PC Cart

- 可配置蓄电池及UPS电源系统，可搭载≤22寸一体机电脑显示器
- 一体机电脑建议承重≤10Kg
- 厢体共有20个病历夹托架，每层高20mm，宽240mm
- 工作台面离地高度：1048.5mm，建议台面负荷≤15Kg
- 工作台面为ABS工程塑料，533mm(L)×455mm(W)
- 伸缩式键盘鼠标托架，高度：828.4mm
- 键盘托架尺寸：440mm(L)×256mm(W)
- 鼠标托盘尺寸：208mm(L)×200(W)
- 后置手推式储物盒，手推把高度：830mm
- 推车尺寸：659.1mm(L)×640.9mm(W)×1436.6mm(H)
- 脚轮：超静音医疗脚轮
- 选配件：扫描枪架

- Battery and UPS system inside the base;White LEDs provide light over keyboard tray;used for ≤22 inch All-in-One PC . Proposal load ≤10kg
- 20 tiers inside dossier,tier height 20mm,width 240mm
- Height from countertop to floor: 1048.5mm, Proposal Table load ≤15kg
- Large, smooth ABS worksurface dimensions:533mm(L) x 455mm (W)
- Ergonomic back-tilt keyboard tray with left or right mouse tray,height:828.4mm
- Keyboard tray dimensions: 440mm(L) x 256mm(W)
- Mouse tray dimension: 208mm(L) x 200mm(W)
- Back storage Bin with handle,handle height: 830mm
- Cart dimensions: 659.1mm(L) x 640.9mm(W) x 1436.6mm (H)
- Front-locking silent casters

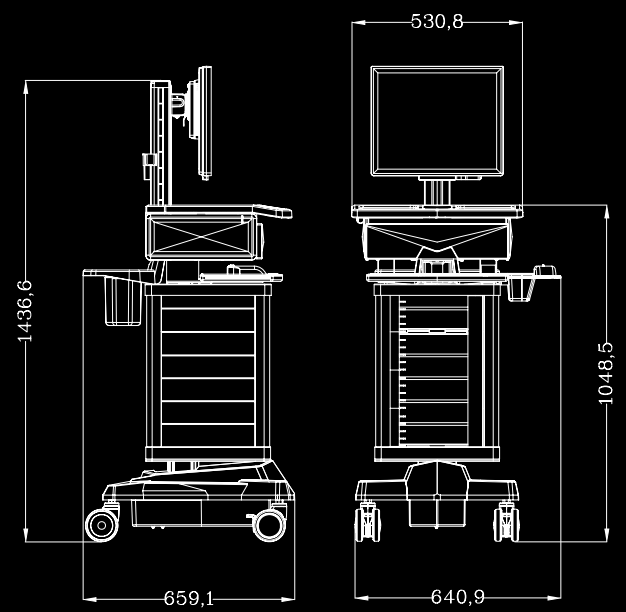

Model:
BWT-001E





笔记本推车

Laptop Cart

- 配置可升降机构，升降行程为 $400 \pm 20\text{mm}$ ，升降负荷 $\leq 15\text{Kg}$
工作台面高度 $890\text{mm}-1290\text{mm}$
- 台面为ABS工程塑料，尺寸： $533\text{mm}(\text{L}) \times 455\text{mm}(\text{W})$
- 笔记本电脑仓： $430\text{mm}(\text{L}) \times 346\text{mm}(\text{W}) \times 56.5\text{mm}(\text{H})$
内置电源插座、外接电源插座
- 适用于15寸及以下笔记本电脑
- 抽屉内腔尺寸： $379\text{mm}(\text{L}) \times 298.5\text{mm}(\text{W}) \times 84\text{mm}(\text{H})$
- 键/鼠托盘尺寸：键盘托盘尺寸 $440\text{mm}(\text{L}) \times 256\text{mm}(\text{W})$
鼠标托盘尺寸 $208\text{mm}(\text{L}) \times 200\text{mm}(\text{W})$
- 底座：底座为PA6框架、底座盖板为ABS工程塑料
- 脚轮：超静音医疗脚轮
- 选配件：打印机托盘，电源及UPS系统，抽屉组

- Height adjustment range for worksurface: $400 \pm 20\text{mm}$, Lifting load $\leq 15\text{kg}$,
Worksurface height $890\text{mm}-1290\text{mm}$
- Large, smooth ABS worksurface dimensions: $533\text{mm}(\text{L}) \times 455\text{mm}(\text{W})$
- Laptop cabinet dimensions: $430\text{mm}(\text{L}) \times 346\text{mm}(\text{W}) \times 56.5\text{mm}(\text{H})$
With external 2-Outlet power strip and main power cable at the cart base.
- Applied for laptop ($\leq 15"$)
- Internal dimensions for drawer: $379\text{mm}(\text{L}) \times 298.5\text{mm}(\text{W}) \times 84\text{mm}(\text{H})$
- Keyboard tray dimensions: $440\text{mm}(\text{L}) \times 256\text{mm}(\text{W})$
- Mouse tray dimension: $208\text{mm}(\text{L}) \times 200\text{mm}(\text{W})$
- Base: PA6 + ABS cover
- Silent medical casters

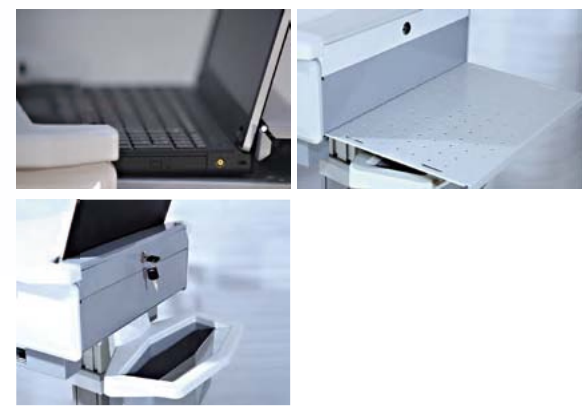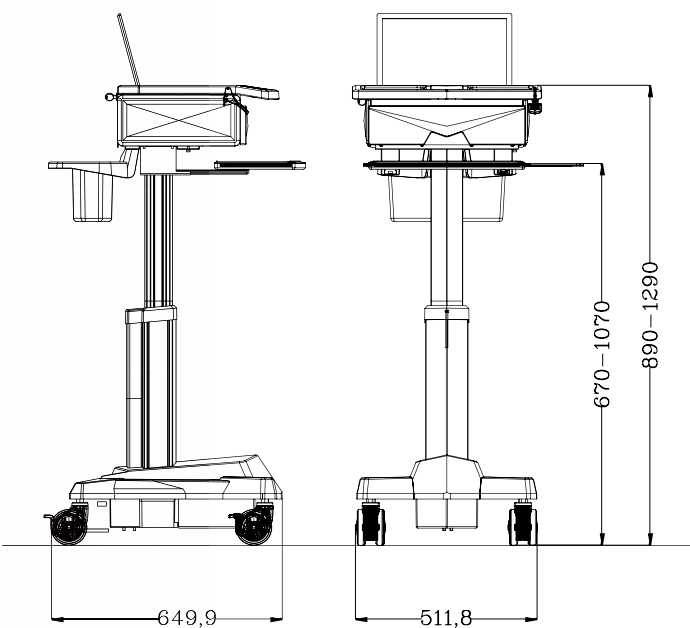


简易笔记本推车

Simple Laptop Cart

- 配置可升降机构，升降行程为 $400 \pm 20\text{mm}$ ，工作台面高度
 $750\text{mm}-1150\text{mm}$ ，升降负荷 $\leq 15\text{Kg}$
- 台面为ABS工程塑料，尺寸： $533\text{mm}(\text{L}) \times 455\text{mm}(\text{W})$
- 笔记本电脑仓： $430\text{mm}(\text{L}) \times 346\text{mm}(\text{W}) \times 56.5\text{mm}(\text{H})$
- 适用于15寸及以下笔记本电脑
- 可选翻转式键盘托架，键盘托盘尺寸： $440\text{mm}(\text{L}) \times 256\text{mm}(\text{W})$
- 鼠标托盘尺寸 $208\text{mm}(\text{L}) \times 200\text{mm}(\text{W})$
- 底座：底座为PA6框架、底座盖板为ABS工程塑料
- 脚轮：超静音医疗脚轮

- Height adjustment range for worksurface: $400 \pm 20\text{mm}$, worksurface
height: $750\text{mm}-1150\text{mm}$, lifting load $\leq 15\text{Kg}$
- Large, smooth ABS worksurface dimension: $533\text{mm}(\text{L}) \times 455\text{mm}(\text{W})$
- Laptop cabinet dimension: $430\text{mm}(\text{L}) \times 346\text{mm}(\text{W}) \times 56.5\text{mm}(\text{H})$
- Applied for ≤ 15 inch laptop
- Optional rotary keyboard tray, keyboard tray dimension: $440\text{mm}(\text{L}) \times 256\text{mm}(\text{W})$
- Mouse tray dimension: $208\text{mm}(\text{L}) \times 200\text{mm}(\text{W})$
- Base: PA6 + ABS cover
- Silent medical casters

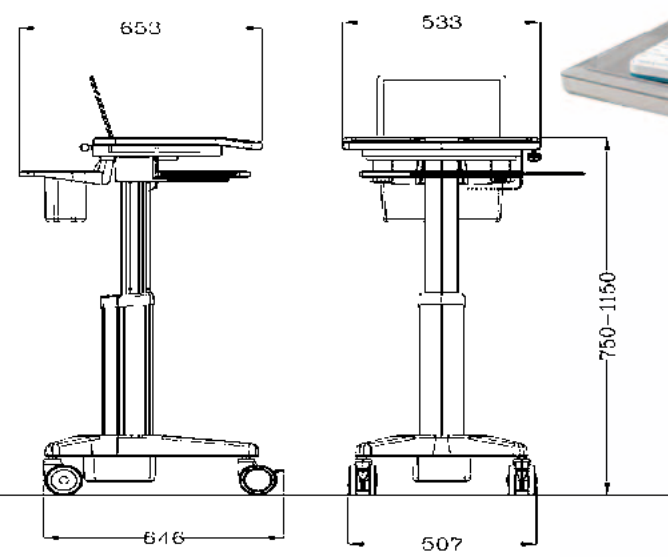


护理车-A型

Nursing Cart A

- 车体为铝合金材质配彩钢箱体框架结构，喷漆处理，轻便而坚固耐腐
- 大容量抽屉配置，共6层且5层可选配备药品盒子和格栅分隔板，方便放置不同药品，抽屉统一采用连锁机构，有效保证药品安全
- 工作台面离地高度：977mm，工作台面采用10mm钢化玻璃面板，易消毒清洁，尺寸：500mm(L)×500mm(W)， 建议台面负荷≤5Kg
- 推车左侧面可选配置侧挂盒、资料盒，方便消毒液瓶和其他资料的放置
- 推车右侧面可选配置利器盒、分类式储物盒（垃圾桶），便于废弃物的分类处理
- 可配置笔记本或一体机悬臂支架及扫描枪托架，方便使用移动多媒体设备
- 可配置伸缩式不锈钢输液架
- 推车外形尺寸：768mm(L)×585mm(W)×1377mm(H) *（含支架高度）
- 脚轮：超静音医疗脚轮
- 选配：粉色和蓝色可选，不锈钢伸缩式输液架，可加装锂电池系统

- Cart Body made of aluminum alloy with steel box frame structure, light and strong, also corrosion resistance
- Six spacious drawers,5 drawer with different size of lattices for different medicine. Drawers by interlocking system.
- Worksurface height:977mm,10mm thickness tempered glass worksurface, easy-to-clean,dimensions: 500mm(L) x 500mm(W), Proposal Table load ≦5kg- Left side with sterilize liquid bottle box and document basket
- Right side with 2 sharps boxes and 2 garbage bins
- Optional Laptop or all-in-one computer rocker arm and scanner gun hanger
- 768mm(L) 585mm(W) 1377mm(H) (include LCD arm height)
- Silent medical casters
- Option :Color Pink or Blue. Retractable stainless steel infusion stand, lithium power system

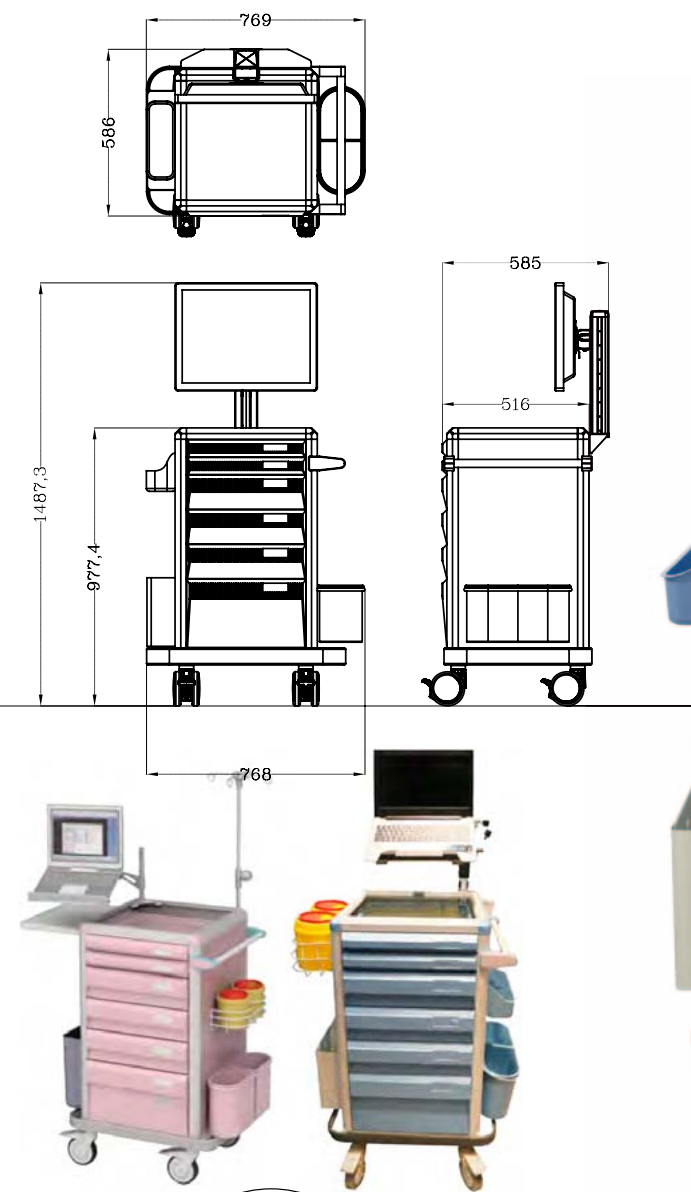

Model:
BWT-001F1




Model:
BWT-001F2

护理车-B型

Nursing Cart B

- 全车采用铝塑钢结构组成，台面采用ABS工程塑料一次成型，车体轻便抗腐蚀，容易清洁。
- 内嵌凹槽防滑工作台面，尺寸480mm（L）*435mm(W)，配置PVC软玻璃垫，易于清洁，防滑防刮。
- 台面上装有不锈钢围栏，高度85mm，有效保证移动过程物品的防护作用。
- 台面离地高度920mm，台面两端为一体成型的手推把手，方便操作和移动安全，且易于清洁。
- 推车背部两侧装有2个带调节旋钮的不锈钢固定架，可根据需求扩展增加输液架或麻醉组合支架。
- 推车配置4层抽屉，抽屉内部可放置自由分隔档片，抽屉面板上装有活动式标签卡片。
- 抽屉下部设有一灵活的置物空间，尺寸为478mm（L）*440mm(W)*210mm(H)，方便放置大件护理物品。
- 推车左侧配置2个翻斗式资料盒，右侧配置一个利器盒和2个翻盖式分类垃圾桶。
- 脚轮：超静音医疗脚轮

- Aluminum plastic steel structure, molding ABS worksurface ,corrosion resistant and easy to clean
- An embedded groove antiskid table, dimensions: 480mm (L) *435mm (W), with PVC mat, easy to clean, anti scratch
- fence height 85mm for material movement protection
- Worksurface height: 920mm, handles on both ends
- With 2 adjusting knob fixed stainless steel frame, easy for expansion of the transfusion frame or anesthesia combined support.
- Four drawers with partition fence, movable type tag on the panel of the drawer
- Free spcace below the drawer for larger items , space dimensions: 478mm (L)*440m m(W)*210mm(H)
- Two document box on the left, one sharps box and 2 classification dustbin on the right
- Silent medical casters

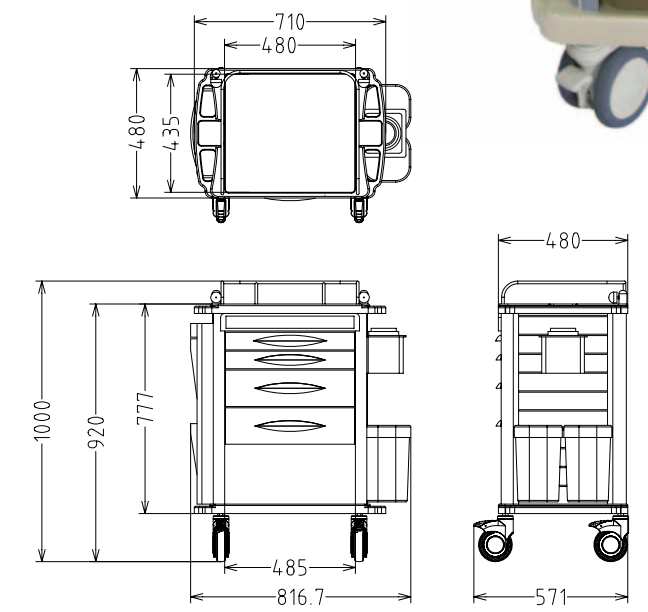


Model:
BWT-001F3

治疗车

Nurse Treatment Cart

- 配置可升降机构，升降行程为 $400 \pm 20\text{mm}$ ，升降负荷 $\leq 15\text{Kg}$
- 工作台离地高度： $750\text{mm}-1170\text{mm}$ （ $\pm 20\text{mm}$ ）
- 台面尺寸： $610\text{mm}(\text{L}) \times 470\text{mm}(\text{W})$
台面下方有笔记本仓，适用14寸及以下笔记本
- 笔记本电脑仓加锁设计，由一把主锁和一把备用锁控制开关
- 配有深浅共两个收纳盒，深托盘可选配网篮
收纳盒尺寸 $469.5\text{mm}(\text{L}) \times 306\text{mm}(\text{W})$
- 配有围栏挂架，可自由悬挂组件，标配三个小收纳盒，一个异物盒和一个扫描枪托架
- 底座：底座为PA6框架、底座盖板为ABS工程塑料
- 脚轮：超静音医疗脚轮
- 选配件：围栏挂架，小收纳盒，异物盒，扫描枪架，探头架
感应垃圾桶，利器盒，深浅收纳盒，网篮

- Height adjustment range for worksurface: $400 \pm 20\text{mm}$,
Lifting load $\leq 15\text{kg}$
- Worksurface height: $750-1170\text{mm}$ ($\pm 20\text{mm}$)
- Worksurface dimensions: $610\text{mm}(\text{L}) \times 470\text{mm}(\text{W})$
There is a small laptop($\leq 14"$) cabinet which is lockable with 2 keys
- 2 big storage trays with different depth.
Dimensions: $469.5\text{mm}(\text{L}) \times 306\text{mm}(\text{W})$
- Fence with hangers(include 3 small pockets,a scanner gun holder,
a gel cup)
- Base: PA6 + ABS cover
- Silent medical casters

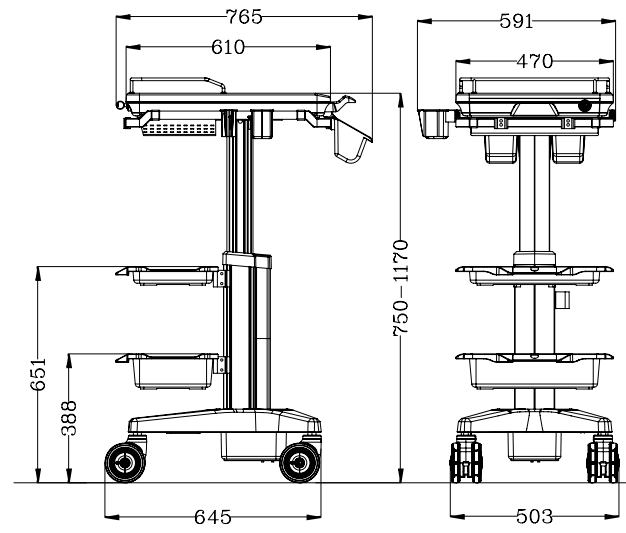

Model:
BWT-001G1



Model:
BWT-001G2+Laptop Arm



Model:
BWT-001G



双向双踏板脚轮：
360度无死角，刹车解刹轻松自如

多功能治疗车

Multi-functional Medication Cart

- 立柱采用铝合金喷漆，轻便而坚固耐腐，两面配有安装槽，方便悬挂相关配件
- 工作台面高度 900mm ，台面尺寸： $650\text{mm}(\text{L}) \times 500\text{mm}(\text{W})$ ，配备台面围栏或台面瓶架。工作台面为ABS材质中空聚氨酯发泡填充，表面皮纹处理，易清洗耐腐蚀，强度好，质量轻，台面建议负荷 $\leq 10\text{Kg}$
- 台面下方为多层抽屉设计，标准为1薄1中2层抽屉，并可选配备分类盒和格栅分隔板，具体可根据需求选配加配
- 左立柱侧面可选配置侧挂盒、侧挂网篮，方便消毒液瓶和其他物品的放置
- 右立柱侧面可选配置利器盒、分类垃圾桶，主要用于废弃物的分类处理
- 推车外形尺寸(含图示外挂件)： $1000\text{mm}(\text{L}) \times 510\text{mm}(\text{W}) \times 980\text{mm}(\text{H})$ 。
推车颜色：粉色或蓝色可选
- 脚轮：超静音医疗脚轮


- The cart body column using aluminum alloy spray paint, light and strong corrosion resistance. The column on both sides with the installation slot, convenient suspension related accessories
- Worktable height: 900mm , dimension: $650\text{mm}(\text{L}) \times 500\text{mm}(\text{W})$, with barrier or bottle rack. ABS worksurface easy-to-clean, Proposal Table load $\leq 10\text{kg}$
- Multilayer drawer design, standard with 1 thin and 1 middle drawer, it can be matched by requirement
- Left column with sterilize liquid bottle box and grid basket
- Right column with 2 sharps boxes and 2 garbage bins
- Cart dimension: $1000\text{mm}(\text{L}) \times 510\text{mm}(\text{W}) \times 980\text{mm}(\text{H})$. Pink or blue optional
- Silent medical casters

颜色及抽屉组可选



Model:
BWT-001G3

- 16mm 抗倍特板CNC成型台面，美观耐用
- 16mm CNC compact panel table, beautiful and durable
- 气弹簧助力升降，把手轻松调节
- air spring lift, handle easily adjusted
- 深浅托盘可选，位置可调节
- Depth & shallow tray optional, position can be adjusted
- 立柱可选颜色：蓝色、粉色、绿色、橙色
- Column color: blue, pink, green, orange

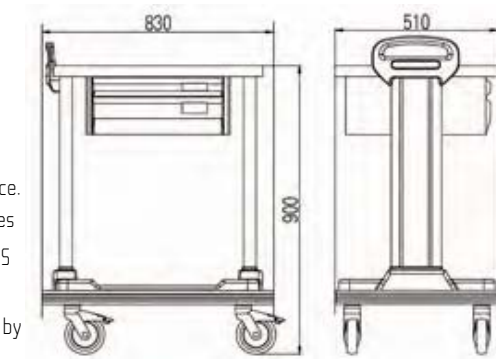

Model:
BWT-001G4



Model:
BWT-001G5

多功能治疗护理推车-B型


Multi-Functional Nurse Cart B

- ABS工程塑料药品抽屉, 1个大抽屉, 6个小抽屉, 满足不同的分类存放需求
- 推车配置升降立柱, 脚踏式升降控制板, 工作台面离地高度: 863mm-1092mm (±20mm), 建议台面负荷≤10Kg
- 工作台面尺寸: 610mm(L)×470mm(W), 台面可配置高度85mm围栏, 可挂消毒液网篮
- 台面下方设有自吸滑轨扩展抽屉, 抽屉尺寸358mm(L)*318mm(W)*3mm(H), 亦可当扩展台面使用
- 台面3个侧面配有围栏挂架, 可自由悬挂组件, 标配7个小收纳盒
- 2个脚踏式不锈钢缓冲静音垃圾桶, 2个2L的利器盒, 满足废弃物的分类收集要求
- 底座: 底座为高强度金属框架结构、底座盖板为ABS工程塑料, 美观大方
- 推车尺寸: 560.8mm(L)×725.2mm(W)×947.6mm-1177.6mm(H)
- 脚轮: 超静音医疗脚轮
- 选配件: 异物盒, 扫描枪架, 探头架, 收纳盒, 网篮

- ABS engineering plastic medicine drawer, 1 large drawers, 6 small drawers, to meet the needs of different drugs classified storage
- With lifting column and pedal type lifting control board, worksurface height: 863mm-1092mm (±20mm), proposal table load ≤ 10kg
- Worksurface dimensions: 610mm(L) x 470mm(W), fence height 85mm for hanging basket disinfectant
- A self suction rail extension drawers, drawer dimension: 358mm (L) *318mm (W) *3mm (H)
- Fence with hangers(include 7 small pockets)
- With two stainless steel mute pedal dustbin and two 2L sharps box
- Base: SPCC (steel plate) + ABS cover
- Cart dimensions: 560.8mm(L) x 725.2mm(W) x 947.6mm-1177.6mm(H)
- Silent medical casters
- Select accessories: storage box, scanning gun hanger, probe frame, basket



Model:
BMT-001D

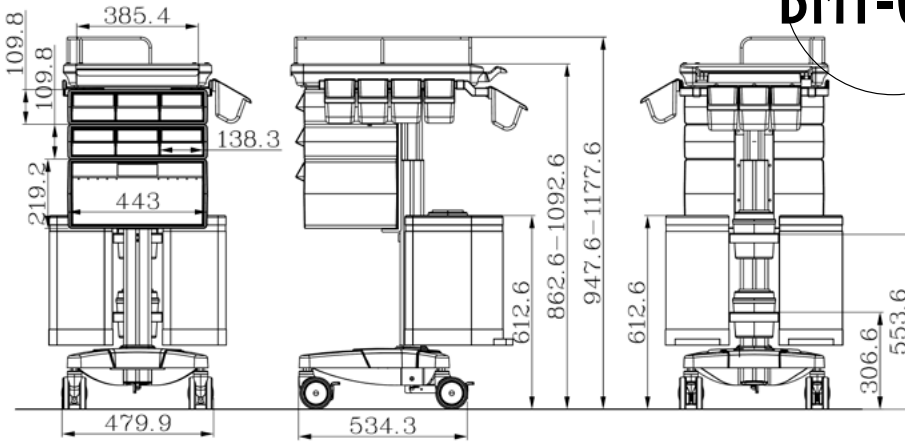

床边收费车


Bedside Charging Cart

- 主要用于移动收费, 到病房即可为病人提供便捷的结算服务
- 工作台面高度: 900mm
- 配置一体机或笔记本支架, 满足移动信息交换处理需求
- 抽屉空间可放置POS机, 键盘鼠标等相关物品
- 配置点钞机托盘, 方便适用
- 可配置资料盒, 侧挂盒, 侧挂网篮等相关挂件
- 整车外形尺寸: 1000mm(L)×510mm(W)×980mm(H) (含外挂件, 不含显示器立柱高度)
- 可配置电源及UPS系统
- 脚轮: 超静音医疗脚轮

- Convenient for bedside charging in sickroom
- Worksurface height: 900mm
- Arm for all-in-one computer or laptop
- Drawer space for POS device, keyboard, mouse
- Counting machine tray
- Optional document basket, grid basket
- Cart dimensions: 1000mm(L) x 510mm(W) x 980mm(H) (not include LCD arm height)
- Battery and UPS system
- Silent medical casters



Model:
BMT-001G

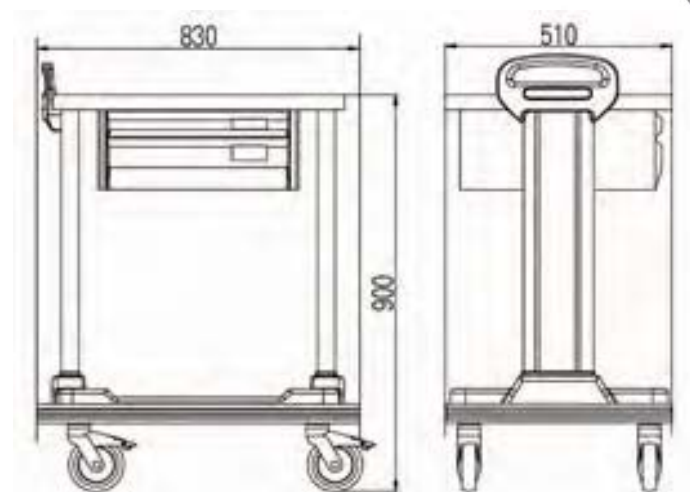


送药车 - A型

Medication Cart A

- 大容量抽屉配置，共6层且5层配备药品盒子和格栅分隔板，方便放置各种不同药品
- 抽屉统一采用连锁机构，有效保证药品运送的安全
- 工作台面离地高度：990mm
- 主工作台面采用10mm钢化玻璃面板，易消毒清洁，尺寸：498mm(L)×500mm(W)，建议台面负荷≤5Kg
- 活动台面可自由折叠，有效增加工作空间，尺寸：470mm(L)×290mm(W)
- 配置笔记本悬臂支架及扫描枪托架，方便使用移动多媒体设备
- 配置两个分类式储物盒（垃圾桶）
- 推车外形尺寸：700mm(L)×600mm(W)×1200mm(H)
- 活动工作台展开推车尺寸：950mm(L)×600mm(W)×1200mm(H)（含悬臂高度）
- 脚轮：超静音医疗脚轮
- 选配件：分类盒，格栅隔板，利器盒及托架，资料盒

- Six spacious drawers,5 drawer with different size of lattices for different medicine.
- Drawers by interlocking system.
- Worksurface height: 990mm
- 10mm thickness tempered glass worksurface,easy-to-clean dimensions: 498mm(L) x 500mm(W)
- Proposal Table load ≤5kg
- Foldable worksurface dimensions: 470mm(L) x 290mm(W)
- Laptop rocker arm and scanner gun hanger
- 2 Dustbins
- Cart dimensions: 700mm(L1)/950mm(L2) x 600mm(W) x 1200mm(H) (include rocker arm height)
- Silent medical casters

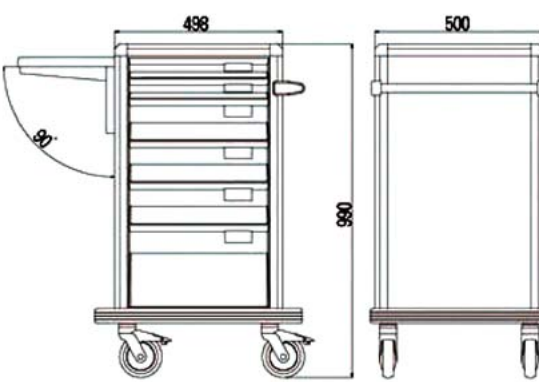


Model:
BMT-001E

内窥镜系统推车 - B型

Endoscopic System Cart B

- 主要用于放置内窥镜系统设备，可高度调节的360度旋转大屏幕显示支架
- 可自由调节每层高度和层数，标准品为2块可调节活动层板，可选配增加层板，活动层板建议承重≤20Kg
- 整车外形尺寸：664mm(L)×630mm(W)×1650mm(H)（含悬臂）
- 工作台面高度：1125mm
- 工作台面尺寸为：527(L)mm×420mm(W)
- 台面上方装有活动万能支臂，可悬挂显示器，标配承重≤9Kg
可选最大承重≤21Kg
- 电源接线槽位设计，方便各层设备仪器供电。
- 脚轮：超静音医疗脚轮

- Convenient for endoscopic system device
- Layers and layer height adjustable, Proposal load ≤20kg/Layer
- Cart dimensions: 664mm(L) x 630mm(W) x 1650(H)
- Worksurface height: 1125mm
- Worksurface dimensions: 527mm(L) x 420mm(W)
- Rocker arm for display,height-adjustable,360°rotation for LCD,
- Standard Load≤9Kg, optional maximum load≤21Kg
- Special power wiring slot
- Silent medical casters

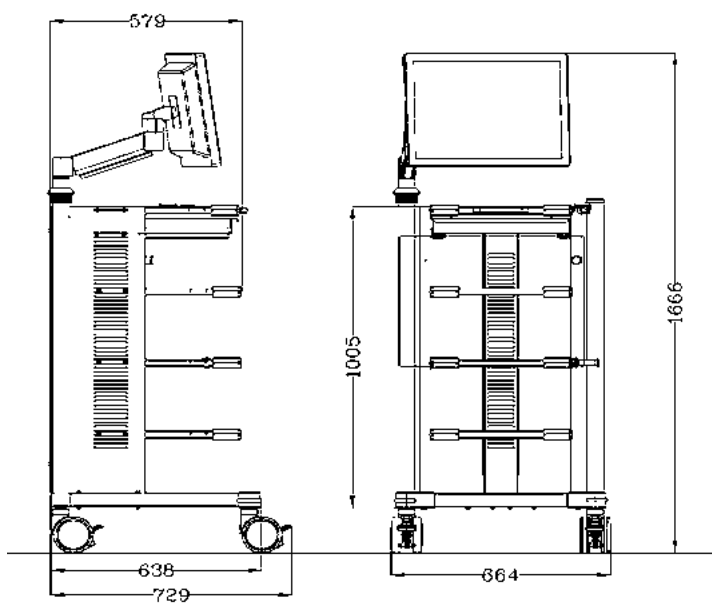

Model:
BWT-003B
+1 Layer 层板




心电图推车

ECG Laptop Cart

- 台面箱体可安装放置各种ECG心电设备，外置导联线支臂；
- 配置可升降机构，升降行程为 $400 \pm 20\text{mm}$ ，工作台面高度 890mm – 1290mm
- 升降负荷 $\leq 15\text{Kg}$
- 可后翻盖式设计，放置适配器， 内置电源线
- 工作台面为ABS工程塑料，尺寸为： $533\text{mm}(\text{L}) \times 455\text{mm}(\text{W})$
- 伸缩式键盘托架，高度： 684mm – 1084mm
- 键盘托架尺寸： $440\text{mm}(\text{L}) \times 256\text{mm}(\text{W})$
- 鼠标托盘尺寸： $208\text{mm}(\text{L}) \times 200(\text{W})$
- 后置手推式储物盒
- 推车宽度为： $513\text{mm}(\text{W})$ ；推车长度为： $672.8\text{mm}(\text{L})$
- 脚轮：超静音医疗脚轮
- 选配件：打印机托盘

- It is for mini ECG device with wire sections arm.
- Height adjustment range: $400 \pm 20\text{mm}$. Worksurface height: 890mm – 1290mm
- Lifting load $\leq 15\text{kg}$
- Back cover clamshell design, use for adapter, Built in power line
- Large, smooth ABS worksurface dimensions: $533\text{mm}(\text{L}) \times 455\text{mm}(\text{W})$
- Sliding keyboard/mouse tray height: 684mm – 1084mm
- Keyboard tray dimensions: $440\text{mm}(\text{L}) \times 256\text{mm}(\text{W})$
- Mouse tray dimension: $208\text{mm}(\text{L}) \times 200\text{mm}(\text{W})$
- Storage bin with handle
- Wheel-to-Wheel Base Dimensions: $513\text{mm} \times 672.8\text{mm}$
- Silent medical casters

Model:
BWT-002ECG
+Printer Tray+打
印机托盘


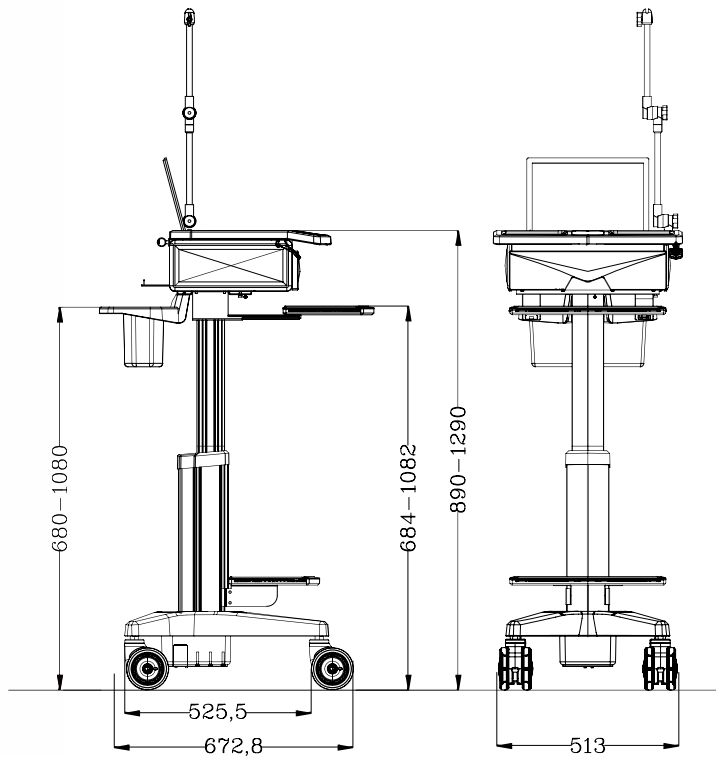


多功能小型设备推车

Multi-Functional Small Equipment Cart

- 五星脚型底座，承载稳定性好，简洁美观，可放置或挂载各种小型设备
- 可灵活安装各种附件和小型设备支架（如麻醉机支架）
- 放置台面设备建议承重 $\leq 30\text{Kg}$ ， 挂载设备建议承重 $\leq 15\text{Kg}$
- 立柱上配置物料网篮，方便相关物品的放置
- 配置手推扶手，高度： 911mm
- 配置金属键盘架及ABS鼠标放置架，键盘架离地高度 818.8mm
- 推车五星脚型底座尺寸：直径 450mm
- 脚轮：超静音医疗脚轮
- 选配件：支架，网篮

- The five-star type base, stable and applied for different small equipment
- Pipe/Wire holder arm available
- Proposal Table load $\leq 30\text{kg}$, proposal mounted load $\leq 15\text{kg}$
- Mesh basket for placement of related goods
- handle height: 911mm
- Metal keyboard/mouse tray,ABS mouse rack, the tray height: 818.8mm
- The five-star type base dimensions: The diameter of 450mm
- Silent medical casters

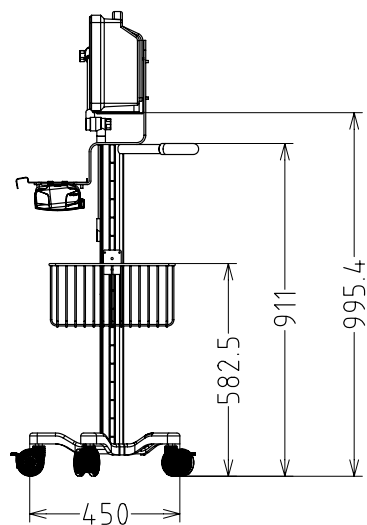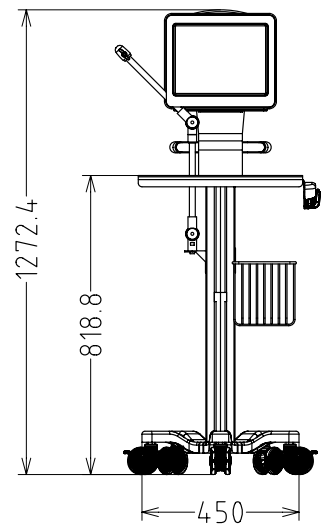

Model:
BWT-004A




小型设备推车

Small Medical Equipment Cart

- 可放置各种小型设备：设备托盘尺寸为310mm(L)×235mm(W)
- 可安装各种小型设备支架（如麻醉机支架）
- 设备放置台面高度为1012mm，台面建议承重≤30Kg
- 配置物料网篮：400mm(L)×220mm(W1) / 130mm(W2)×100mm(H)
- 手推式储物盒，手推把高度：929.2mm
- 推车尺寸（不含设备）：
565.1mm(L)×461.8mm(W)×929.2mm(H)
- 脚轮：超静音医疗脚轮
- 选配件：支架，网篮，打印机托盘

- Applied for different small equipment
- Equipment tray dimensions: 310mm(L) x 235mm(W)
- Pipe/Wire holder arm available
- Equipment tray height: 1012mm, Proposal Table load ≤ 30kg
- Mesh basket dimensions: 400mm(L) 220mm(W1) / 130mm(W2) 100mm(H)
- Storage bin with handle, handle height: 929.2mm
- Cart dimensions (not include equipment):
565.1mm(L) x 461.8mm(W) x 929.2mm(H)
- Silent medical casters

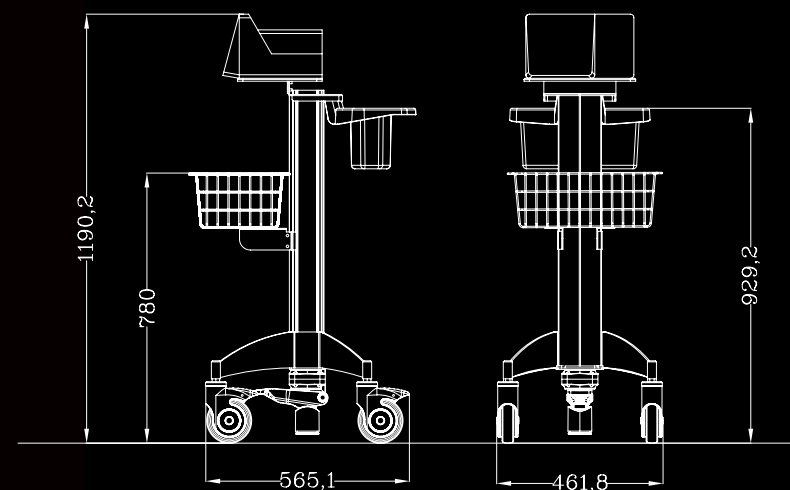



Model:
BWT-004B
+中控脚撑

监护仪推车A款

Patient Monitor Cart A

- 简洁小巧，可搭载13寸监护仪设备，台面建议承重≤15Kg
- 新款推车（G-JB1-00）采用一体化铝合金立柱，顶部设备台面，立柱挂载附件的结构，易于运输和安装
- 设备台面后置手推把，设备台面离地高度：947.4mm(可根据客户需求定制高度)
- 旧款推车（G-JB-00）内嵌式物料托盘，新款推车配置可自由取放的物料托盘，物料托盘尺寸：388mm(L)×238mm(W)×50mm(H)
- 物料托盘离地高度579.8mm（旧款），795.9mm（新款）
- 推车尺寸（不含设备）：505.1mm(L)×629.2mm(W)×947.4mm(H)
- 脚轮：配置4个75mm轮径超静音医疗脚轮

- Concise and compact for 13" patient monitor, Proposal Table load ≤ 15kg
- The new cart integration aluminum alloy column, the top equipment mesa, column mounted attachments, easy to transport and install
- The equipment mesa integrated with the handle, the mesa height: 1151.3mm
- The free PABS tray, dimensions: 388mm(L) x 238mm(W) x 50mm(H)
- ABS tray height: 795.9mm
- Cart dimensions: 502.2mm(L) x 629.2mm(W) x 1151.3mm(H)
- 4PCS of 75mm silent medical casters

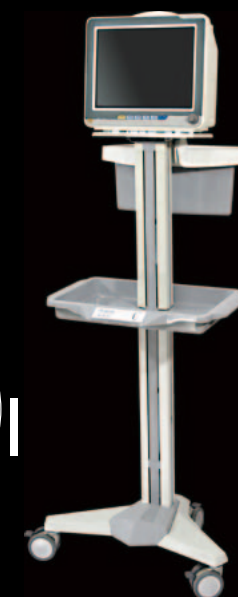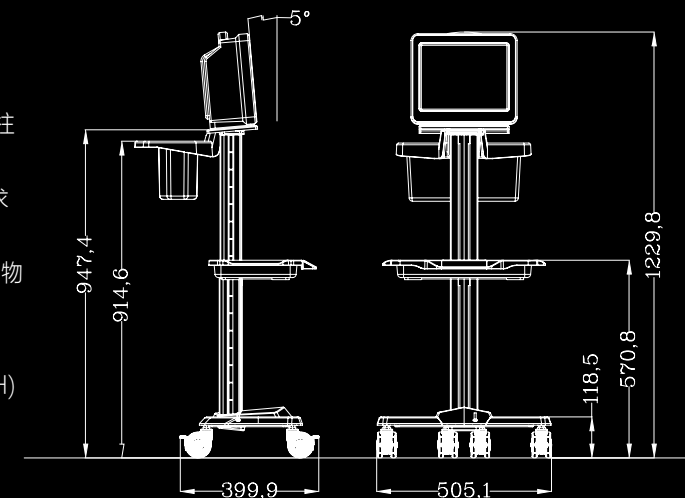

Model:
BWT-004CI




Model:
BWT-004C2

多功能小型设备推车(升降型)

Elevated Small Medical Equipment Cart

- 推车整体简洁美观，配置气弹簧升降立柱，脚踏板式升降调节，满足不用身高要求
- 可根据客户需求定制台面或挂架放置各种小型设备或显示器设备
- 台面高度为869mm-1099mm，可根据要求定制设备固定架，台面建议承重≤12Kg
- 配置物料网篮：380mm(L)×130mm(W)×100mm(H)
- 标准款配置金属键盘架及MINI主机托架，显示器挂架和手推把手
- 底座为金属框架结构，牢固可靠
- 标准款推车尺寸（不含设备）：
470mm(L)×571mm(W)×1153mm-1383mm(H)
- 脚轮：超静音医疗脚轮

- The whole design is simple and beautiful, gas spring lifting column, pedal plate lift and adjust
- Can be customized according to customer demand to placed small devices or display equipment
- The tray height: 869mm-1099mm, Proposal Table load ≤12kg
- Mesh basket dimensions: 380mm(L) x 130mm(W) x 100mm(H)
- Standard configuration: Metal bracket of MINI host and keyboard, display rack and push handle
- Base: SPCC (steel plate)
- Standard Cart dimensions (not include equipment):
470mm(L) x 571mm(W) x 1153mm-1383mm(H)
- Silent medical casters

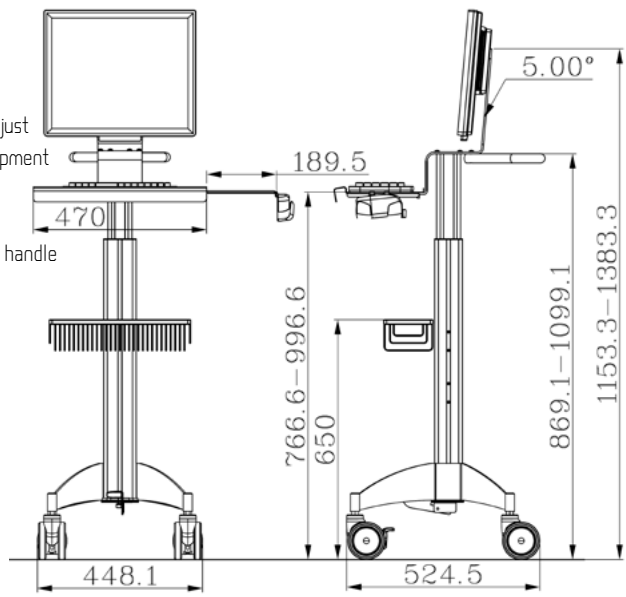


监护仪推车B款


Patient Monitor Cart B

- 轻便小巧，可搭载便携式平板监护仪设备，建议承重≤5Kg
- 推车采用直径40mm不锈钢圆管立柱，顶部为扶手和设备平台一体化设计
- 设备平台离地高度：839.5mm(可根据客户需求定制高度或定制升降立柱)
- 立柱上配置网篮，网篮尺寸：280mm(L)×130mm(W)×100mm(H)
- 五星脚式金属底座，转动灵活，平稳牢固
- 推车尺寸（不含设备）：558.3mm(L)×531.8mm(W)×999.2mm(H)
- 脚轮：配置4个75mm轮径超静音医疗脚轮

- Concise, light and compact for PAD patient monitor, Proposal Table load ≤5kg
- The 40mm stainless steel tubular column, The top is an integrated design of the handrail and the equipment platform, easy to install and use.
- The equipment mesa height: 839.5mm (Can be customized according to height or lift demand)
- The basket dimensions: 280mm(L) x 130mm(W) x 100mm(H)
- Five foot metal base, the rotation is flexible, stable and firm
- Cart dimensions: 558.3mm(L) x 531.8mm(W) x 999.2mm(H)
- 4PCS of 75mm silent medical casters

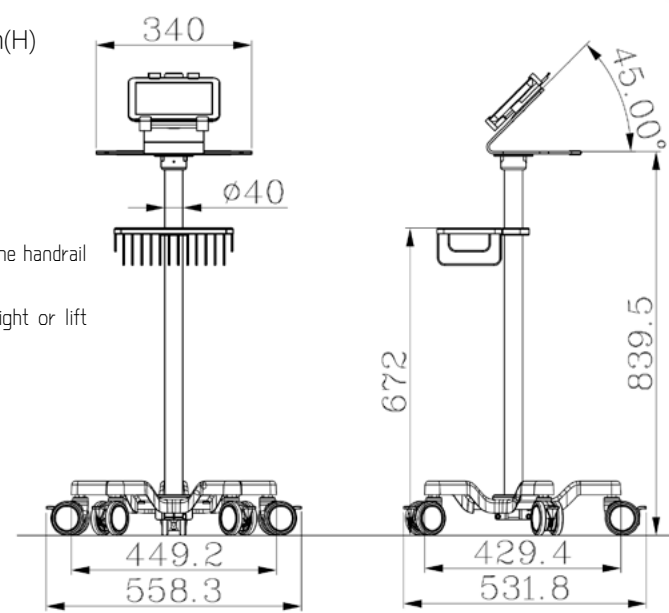


Model:
BWT-004C3

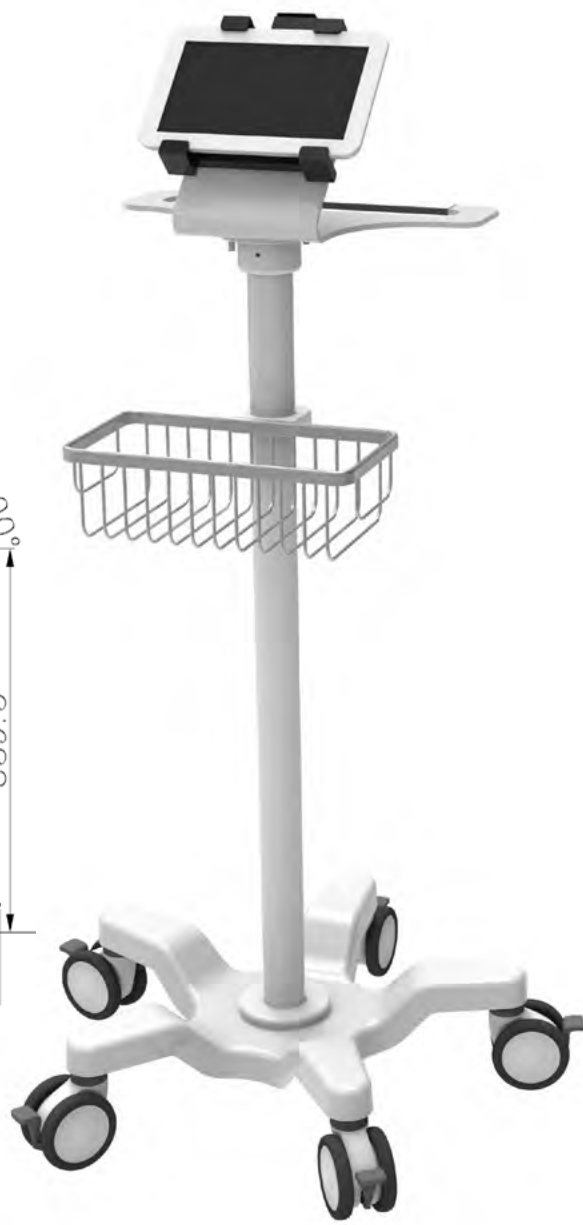

手术室示教车

Operation Room Teaching Cart

- 新款推车采用机柜箱体多层设计，协调大方，方便放置手术室示教系统的多台设备
- 工作台面高度：1156.3mm，工作台面尺寸为：533mm(L)×455mm(W)
- 机柜内部每层设备层板高度可调，活动层板建议承重≤15Kg
- 台面立柱装有活动万能长摇臂，可悬挂摄像机，并可自由活动至任意位置，承重范围3~5Kg
- 长摇臂活动长度范围900mm~1650mm
- 内置电源线，并配备一位多排插，方便各层设备仪器供电
- 脚轮：超静音医疗脚轮

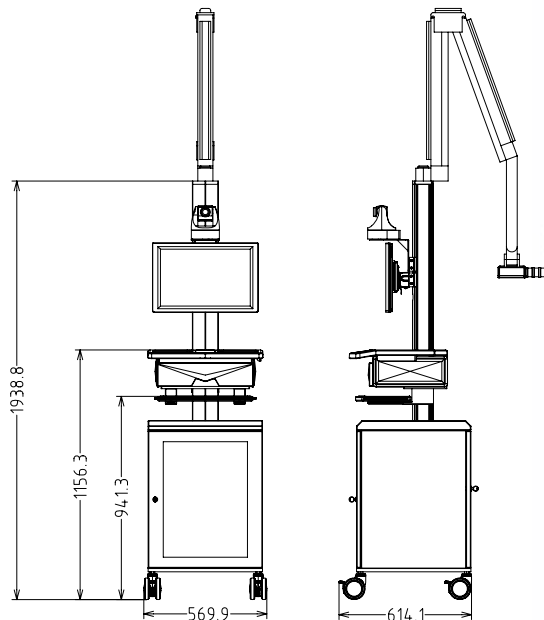

- Cabinet and multilayer design, conveniently placed operation room teaching system equipment
- Cart dimensions: 533mm(L) x 697mm(W) x 2347(H)
- Worksurface height: 1156.3mm, Worksurface dimensions: 533mm(L) x 455mm(W)
- Layers and layer height adjustable, Proposal load ≤ 15kg/Layer
- Universal direction long rocker arm for Camera equipment, Proposal load 3~5Kg
- Long arm length range of 900mm-1650mm
- Built in power line, equipped with a number of socket, facilitate each layer equipment power supply
- Silent medical casters



Model:
BWT-005A1

Model:
BWT-005A2




远程医疗推车

Telemedicine System Cart

- 配置可升降机构，升降行程为400±20mm
- 推车总高度在1534mm~1934mm之间（含摄像头），升降负荷≤17Kg
- 可配置≤21英寸双屏显示器，显示器支架升降建议总承重≤12Kg
- 配有高清晰360度广角摄像头，遥控云台
- 工作台面高度：890mm~1290mm
- 工作台面为ABS工程塑料，533mm(L)×455mm(W)
- 伸缩式键盘托架尺寸：440mm(L)×256mm(W)
- 伸缩式鼠标托盘尺寸：208mm(L)×200(W)
- 后置手推式储物盒，手推把高度：680mm~1080mm
- 脚轮：超静音医疗脚轮

- 内置电脑标准配置（可客户选配）：
CPU：Intel Xeon E3 1230V2+
主板：华硕H61
内存：金士顿 4G/1333
显卡：杰微610 1G
硬盘：WD 500G/SATA
高性能视频采集卡
可选配内置电源及UPS系统

- Height adjustment range for LCD and worksurface: 400 ± 20mm
- Total height is 1534mm-1934mm, Lifting load ≤ 17kg
- Applied for 21" LCD, Proposal evaluation load ≤ 12kg
- HD 360 degree rotating webcam with remote controller
- Worksurface height: 890-1290mm
- ABS worksurface dimensions: 533mm(L) x 455mm(W)
- Keyboard tray dimensions: 440mm(L) x 256mm(W)
- Mouse tray dimension: 208mm(L) x 200mm(W)
- Silent medical casters
- Back storage bin with handle, handle height: 680mm-1080mm
- Built-in computer host specification (for reference) :
CPU: Intel Xeon E3 1230V2+

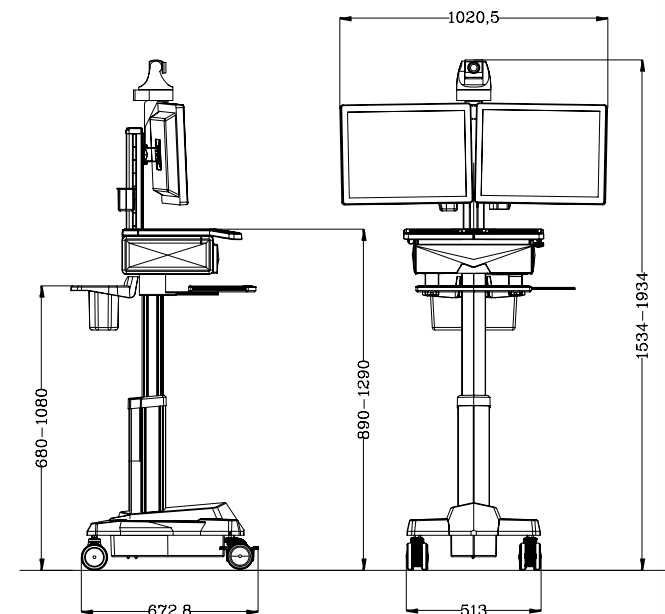

- Mother board: Asus H61
- Memory: 4G/1333
- Graphics card: JW-610 1GB
- HD: WD 500G/SATA
- Video Capture Card
- Optional: Battery and UPS System

Model:
BWT-006



便携拔插式外挂锂电池盒

Portable Plug Type Lithium Battery Box

- 高性能锂电池电芯模组，为各设备提供不间断电源供电
- 标准单组电池容量 24V 11.6AH,尺寸规格：L250*W130*H45 mm
- 注塑成型电池组外壳，ABS阻燃，有效保护电池使用安全
- 便携式拔插设计，电池组带有拔插拉手，简洁方便
- 电池组带有电源开关，电量指示灯，USB 5V 4A 输出，充电输入口
- 电池盒外壳采用SPCC钢板材质喷塑处理，坚固耐用
- 电池盒内置UPS逆变系统，标准AC 220V输出,标配输插座和输出开关
- 单电池可持续供电3.5~4.2小时(基于50~60W标准一体机)，具体因负载而变化
- 双电池组支持单个拔插不间断供电功能，安全可靠
- 支持容量和电压定制，可选AC或DC输出（根据客户产品需求定制）

- High performance lithium battery module, to provide uninterrupted power supply for each device
- Standard single battery capacity 11.6AH 24V, size specifications: L250*W130*H45 mm
- Injection molded battery pack, ABS flame retardant
- Portable battery with plug plug design, simple and convenient handle.
- Battery pack with power switch, power indicator light, 5V 4A USB output port, charging input port
- Shell battery box with SPCC material
- Battery box built-in UPS inverter system, with AC 220V output port and switch
- Single battery sustainable power supply 3.5~4.2 hours (based on the 50~60W All in one PC), the specific changes due to the load
- Double battery supports single plug uninterruptible power supply function, safe and reliable
- Support capacity and voltage customization, can be customized according to customer's product



Model:
BWT-J1-00

简易单电池模组 24V11.6AH
Simple single battery module
电池盒尺寸：L260*W230*H49 mm



Model:
BWT-B1-00

标准单电池模组24V11.6AH
Standard single battery module
电池盒尺寸：L270*W190*H85 mm



标准双电池模组24V11.6AH*2
Standard dual battery module
电池盒尺寸：L270*W190*H130 mm

Model:
BWT-B2-00

电池盒的广泛应用

Lithium Battery Applications

- 一体机工作站
- 护理车工作站
- 电动轮椅
- 助力车
- 小型设备
- 监护设备
- 电动病床
- 移动升降工作台
- 其他相关电动设备设施

- All In One Workstation
- Nursing workstation
- Electric Wheel Chair
- Booster Car
- Small Equipment
- Monitoring Equipment
- Electric Bed
- Mobile Lifting Table
- Other Related Electrical Equip.



进口品牌推车改制

Customized Reform For Other Famous Brand Carts





支架系列解决方案

Arm & Stand Solution

- 配套提供各种医疗支架及解决方案

- 悬臂支架系列：壁挂架，台面架，夹挂架
- 全铝结构，升降悬臂内置气弹簧结构
- 可自由选择组合方式，悬臂可定制加长
- 承重范围：≤20Kg

- 台式支架系列：单显支架，双显支架，单显+笔记本支架
- 铝合金立柱，内置恒力弹簧升降结构，标准立柱尺寸：
386mm(L) × 80mm(W) × 64.5mm(H)，
- 台式支架承重范围可选：3-7.5kg；7.5-12kg，10-16kg

- Provide various medical bracket support and Solutions

- Cantilever bracket series: wall rack, table frame, a clamping rack
- Aluminum module structure, lifting the cantilever built-in air spring structure
- Optional combination, the cantilever can be customized extension
- Bearing range: ≤20Kg

- Desktop bracket series: single display bracket, dual display bracket, single display + notebook bracket
- Aluminum Alloy column dimensions: 386mm(L) × 80mm(W) × 64.5mm(H), Height adjustable with the help of internal lift construction
- Bearing range: 3-7.5kg, 7.5-12kg, 10-16kg optional



SINGLE LCD LIFT STAND

台式液晶显示器
升降支架




DUAL LCD LIFT STAND

台式液晶显示器双显
升降支架



LCD & LAPTOP LIFT STAND

LCD&笔记本
升降支架

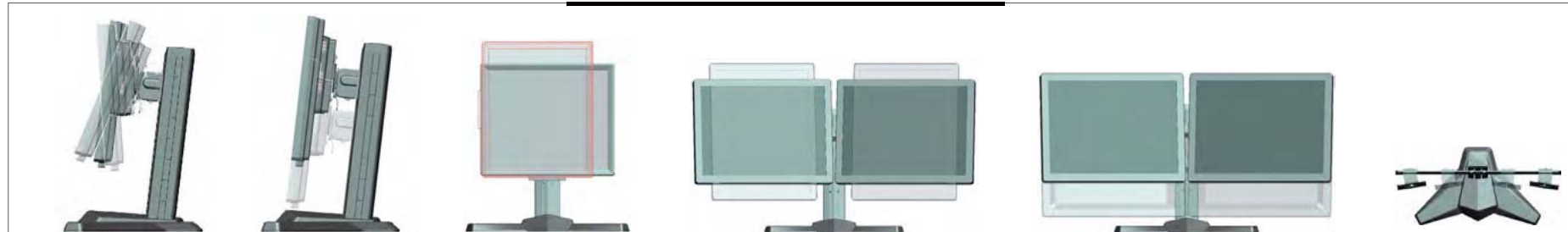

纵向与横向90°屏幕任意旋转

可根据不同工作环境和工作需要90° 纵向与横向旋转屏幕，无需任何调节装置即可旋转。简单方便可挂载大部分17~26寸显示器和一体机电脑。支持VESA总线产品的安装。

ROTATION

Landscape to portrait rotation is available in different environment. Enable rotation without any knobs and levers. Position most 17-26 inch display. Compatible with VESA bus product

最佳人机工程学舒适度任意倾斜

通过调节屏幕的显示视角用以获取最大倾斜20°。无需任何调节装置即可恒力倾斜，并保持在任意倾斜角度，不回弹。可挂载大部分17~26寸显示器和一体机电脑。

TILT-FORWARD AND BACKWARD

Up/Down tilt:15°/-5°for maximum ergonomic comfort-promotes wellness. Enable constant tilt without knobs and levers, and keep it at any angle. Position most 17-26 inch display

恒力升降行程13cm

通过升降屏幕的高度用以获取最佳人机工程学的舒适度，升降行程13cm。无需任何调节装置即可恒力升降，并保持在任意高度，不下坠。可挂载大部分17~26寸显示器和一体机电脑。

LIFT-UP AND DOWN

Adjust the height of your LCD for ergonomic comfort. Height adjustment:13cm Enable constant lift without knobs and levers, and keep it at any height Position most 17-26 inch display

大开口底座设计

扎实的大开口底座设计，底座龙骨为五金材质，因此支架在挂载显示器、一体机时，也不用担心发生晃动、倾倒等安全隐患。

WEIGHT CAPACITY

Solid base design, material of base keel is metal, which show very good stability when position display. Weight capacity of the stand 7-16kg(15.4-35.3lbs)

双屏任意切换

通过双屏可减少在不同文档或应用程序之间来回切换的次数，从而大幅度缩短完成任务的时间，使工作效率得到较大的提升。

HIGH EFFICIENCY

Save time by viewing multiple applications windows at once. Eliminate the need to toggle between applications.



创造价值
科技无处不在.....

Technology Is Everywhere To
Create Value